




# GAMME DE PRODUITS D'ENDOSCOPIE

Créée en 1997. Fièrement canadienne.   
Produits commercialisés dans plus de 85  
pays dans le monde.

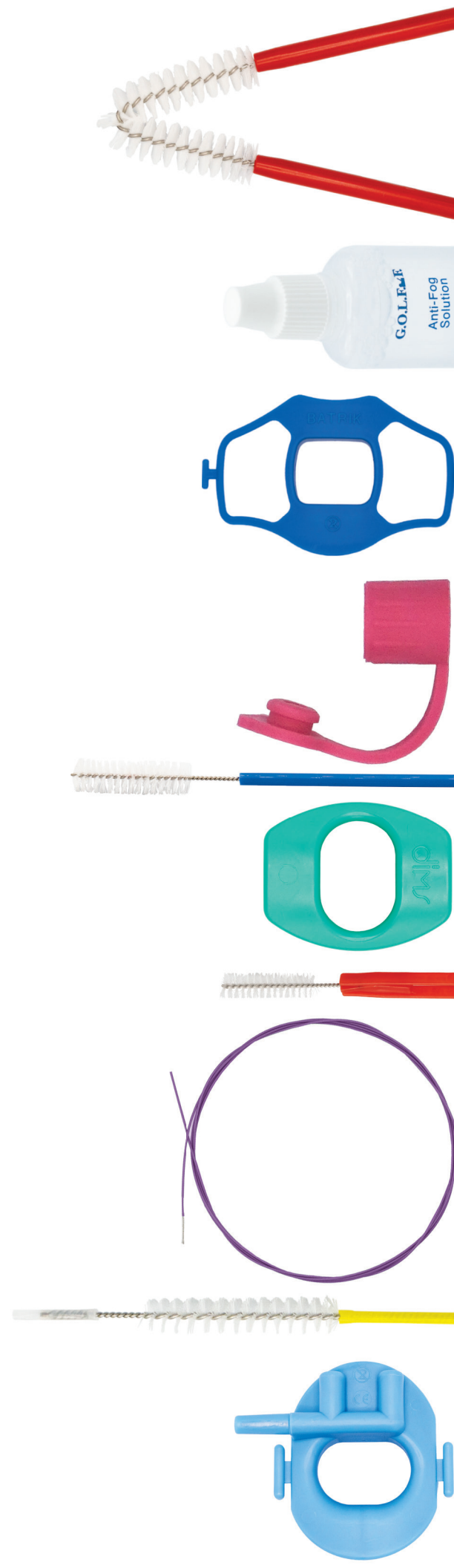

# BATRIK SOLUTION ANTIBUÉE G.O.L.F.F.<sup>MC</sup>

Notre solution antibuée G.O.L.F.F.<sup>MC</sup> résout le problème de la buée souvent rencontré lors des procédures chirurgicales par laparoscopie.

- Prévient l'apparition de buée sur les lentilles
- Garantit une vision plus claire et évite les interruptions inutiles pendant l'opération
- Le kit comprend un flacon de 6 ml facile à presser et une éponge radio-opaque adhésive pour un placement sûr
- OEM (disponible)
- Stérile
- Sans latex



## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
G.O.L.F.F.	Solution antibuée et éponge adhésive	20 / boîte	20" x 16" x 18"

BATRIK


# CALE-DENTS BO2<sup>MC</sup> POUR ENDOSCOPIE

## AVEC ADMINISTRATION D'OXYGÈNE PAR VOIE NASALE


Nos cale-dents BO2<sup>MC</sup> améliorent considérablement la sécurité des patients en fournissant une oxygénation supplémentaire pendant l'endoscopie gastro-intestinale, en prévenant l'hypoxie chez les patients sous sédation et en assurant un confort supérieur aux patients.

- Gain de temps et d'argent en éliminant la nécessité de disposer de broches nasales et de masques à oxygène séparés
- Conçus pour être exempts de bords tranchants afin d'assurer le confort et la sécurité des patients
- Disponibles exclusivement en usage unique
- Une sangle de maintien est disponible en option pour garantir un ajustement sûr
- Les cale-dents et les bandes de rétention optionnelles sont tous sans latex, sans plomb et sans DEHP

**BO2**  
(FACE AVANT)

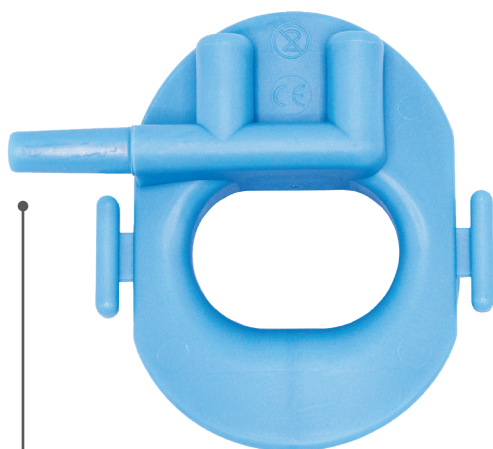

**BO2**  
(FACE ARRIÈRE)

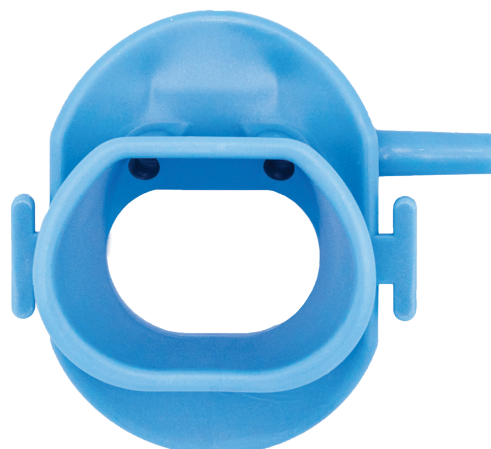

PORT D'ADMINISTRATION DE L'O2

## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	TYPE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
<b>BO2</b>	Usage unique	18 mm / 54FR, sangle incluse	100 / boîte	10" x 10" x 10"
<b>BO2-N</b>	Usage unique	18 mm / 54FR, sans sangle	100 / boîte	10" x 10" x 10"

# BATRIK CALE-DENTS BITESTRONG<sup>MC</sup> POUR ENDOSCOPIE

## CALE-DENTS POUR ADULTES ET ENFANTS

Nos cale-dents Bitestrong<sup>MC</sup> offrent un passage sûr dans la bouche du patient pendant l'ETO, protégeant ainsi les dents et l'endoscope du patient.

Notre procédé de moulage assure une finition lisse sans bords tranchants (ébarbage) qui peuvent souvent irriter la bouche du patient. Tous les cale-dents sont emballés individuellement dans des sachets en PE scellés et faciles à ouvrir, et sont sans latex, sans plomb et sans DEHP. Des sangles supplémentaires sont disponibles, si nécessaire.

### USAGE UNIQUE

- Disponibles sans rétention dentaire

### RÉUTILISABLE

- Conçus pour un usage répété et résistant aux cycles de stérilisation chimique et à la vapeur couramment pratiqués (134 °C / 275 °F).
- Disponibles avec ou sans sangle ajustable



B5



B1



B3



B4



B6

## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	TYPE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
<b>B1</b>	Usage unique <a href="#">Enfants</a>	16 mm / 48FR, sangle incluse	100 / boîte	10" x 10" x 10"
<b>B1-25</b>	Usage unique <a href="#">Enfants</a>	16 mm / 48FR, sangle incluse	25 / boîte	10" x 7" x 7"
<b>B1-N</b>	Usage unique <a href="#">Enfants</a>	16 mm / 48FR, sans sangle	100 / boîte	10" x 10" x 10"
<b>B3</b>	Usage unique	20 mm / 60FR, sangle incluse	100 / boîte	10" x 10" x 10"
<b>B3-N</b>	Usage unique	20 mm / 60FR, sans sangle	100 / boîte	10" x 10" x 10"
<b>B3-SA</b>	Usage unique	20 mm / 60FR, avec une sangle <u>attachée</u> sur un côté	100 / boîte	10" x 10" x 10"
<b>B3-NDR</b>	Usage unique	20 mm / 60FR, sans bord de rétention dentaire	100 / boîte	10" x 10" x 10"
<b>B3-NDR-N</b>	Usage unique	Same as B3-N, sans bord de rétention dentaire, sans sangle.	100 / boîte	10" x 10" x 10"
<b>B4</b>	Usage unique	19 mm / 60FR	100 / boîte	10" x 10" x 10"
<b>B4T</b>	Usage unique	19 mm / 60FR, sangle incluse	100 / boîte	10" x 10" x 10"
<b>B4T-N</b>	Usage unique	19 mm / 60FR, sans sangle	100 / boîte	10" x 10" x 10"
<b>B6</b>	Réutilisable	19 mm / 60FR	100 / boîte	10" x 10" x 10"
<b>B6T</b>	Réutilisable	19 mm / 60FR, sangle incluse	100 / boîte	10" x 10" x 10"
<b>B6T-N</b>	Réutilisable	19 mm / 60FR, sans sangle	100 / boîte	10" x 10" x 10"
<b>B6-25</b>	Réutilisable	19 mm / 60FR	25 / boîte	10" x 7" x 7"
<b>B6T-25</b>	Réutilisable	19 mm / 60FR, sangle incluse	25 / boîte	10" x 7" x 7"
<b>B6T-N-25</b>	Réutilisable	19 mm / 60FR, sans sangle	25 / boîte	10" x 7" x 7"
<b>B5</b>	Usage unique	Sangles de cale-dents 21,7" x 0,79" / 55 cm x 2 cm	100 / boîte	10" x 13" x 1.5"

BATRIK

# PROTECTEURS DE VALVES COUVRETTE<sup>MC</sup>

Nos protecteurs de valves Couvrette<sup>MC</sup> éliminent le besoin de nettoyage et de retraitement manuel des valves réutilisables. Nos protecteurs de valves à usage unique réduisent efficacement la contamination croisée entre les patients et réduisent également les fuites de liquide des pièces pendant les procédures.

- S'adaptent facilement et solidement à toutes les valves
- Réduisent le risque d'erreurs
- Usage unique
- Non stérile
- Sans latex

C O N S E I L : LES PROTECTEURS  
DE VALVES RÉUTILISABLES SONT  
NOTOIREMENT DIFFICILES

À NETTOYER. GAGNEZ DU TEMPS  
ET RÉDUISEZ LES RISQUES GRÂCE  
À COUVRETTE<sup>MC</sup>



BIENTÔT DISPONIBLE !



## SÉLECTION DE PRODUITS


N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR	EMBALLAGE	
16-0002	Protecteur de valve à biopsie - Olympus <sup>MD</sup>	Bleu	100 / boîte	
16-0004	Protecteur de valve à biopsie - Pentax <sup>MD</sup>	Rouge	100 / boîte	
16-0022	Protecteur de valve à biopsie - Olympus <sup>MD</sup> et Fujinon <sup>MD</sup>	Bleu	100 / boîte	BIENTÔT DISPONIBLE !
16-0044	Protecteur de valve à biopsie - Pentax <sup>MD</sup>	Rose	100 / boîte	BIENTÔT DISPONIBLE !

REMARQUE : Contactez-nous pour vérifier la compatibilité avec votre champ d'application

# BATRIK BROSSES DE CANAL DAYBRUSH<sup>MC</sup> RÉUTILISABLES

Nos brosses de canal DayBrush<sup>MC</sup> réutilisables peuvent être utilisées pour nettoyer les endoscopes pendant une journée entière. En fait, il a été prouvé qu'elles permettent de nettoyer efficacement jusqu'à 10 endoscopes avant de devoir les mettre au rebut\*.

- L'embout souple assure une manipulation facile dans le canal sans risque de dommage
- L'extrémité arrière est scellée et adoucie pour éviter que le fluide ne soit emprisonné dans le tube. Le processus d'adoucissement permet également d'éviter les dommages si la brosse de nettoyage est utilisée à l'envers.
- Peuvent être stérilisées à la vapeur.
- Le volume des poils est de 20 mm de long, soit près du double de la plupart des brosses du marché. Une grande brosse permet un meilleur contact avec la surface pendant le processus de nettoyage.
- Économies importantes par utilisation par rapport aux autres brosses de nettoyage de canal réutilisables ou jetables.

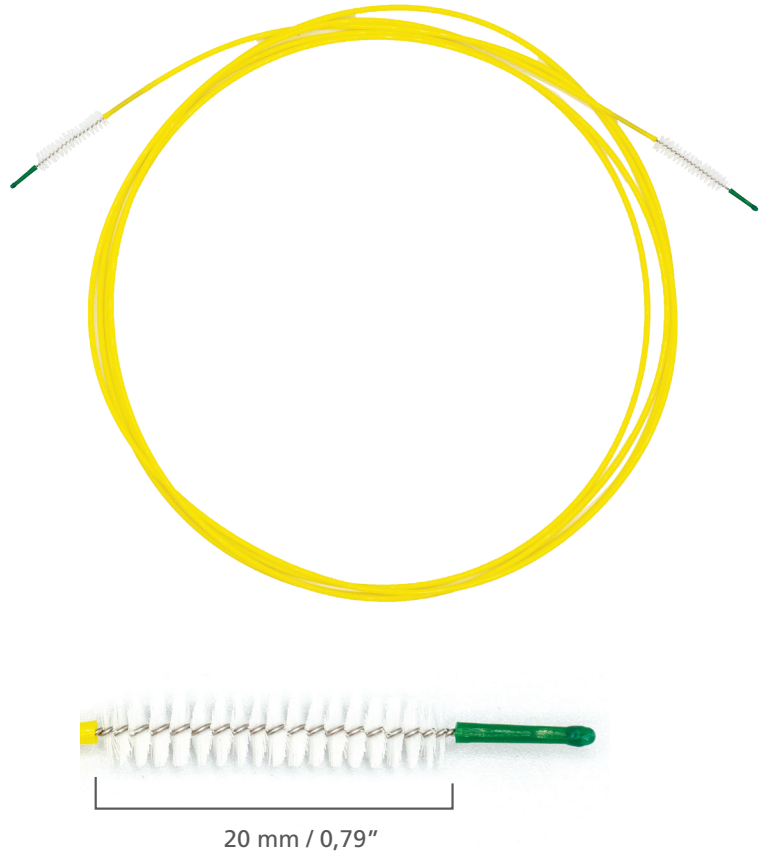

(\* ) À jeter après le nettoyage de 10 endoscopes ou plus tôt si une dégradation de la brosse est constatée. Après dix applications, la brosse peut avoir l'apparence de pouvoir continuer à nettoyer efficacement, mais nous déconseillons une utilisation prolongée en raison du risque de contamination croisée. Le nombre réel d'utilisations variera en fonction de la manipulation et du traitement

## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINE (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
30-18050-T	70" / 180 cm	0,79" / 20 mm	0,20" / 5 mm	0,07" / 1,75 mm	Simple
30-23050-T	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20" / 5 mm	0,07" / 1,75 mm	Simple
30-23050-2T	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20" / 5 mm	0,07" / 1,75 mm	Double

EMBALLAGE : 50 / boîte

## LES COMPLÉMENTS FACULTATIFS DU KIT

AJOUTER LE SUFFIXE :

« F » pour recevoir un ensemble avec notre éponge plate (emballage : boîte de 40). Applicable sur certains modèles seulement, appelez-nous pour plus de détails.

« K » pour recevoir un ensemble avec la brosse de nettoyage à usage unique pour valve/contrôle 5/11 à double extrémité (article n° 27-57787).


Applicable sur tous les modèles.

« FK » pour recevoir à la fois l'éponge et les brosses de nettoyage de la valve.

# BATRIK BROSSES DE CANAL ARC<sup>MC</sup> USAGE UNIQUE

BATRIK propose l'une des plus grandes sélections de brosses de nettoyage de canal d'endoscopie de l'industrie. Nos brosses sont disponibles dans une variété de longueurs, de matériaux et de styles pour s'adapter à la plus large gamme de dispositifs endoscopiques utilisés dans le secteur des soins de santé aujourd'hui.

Quelles que soient vos exigences, vous pourrez trouver la brosse qui convient à vos besoins spécifiques. Si vous ne trouvez pas la brosse dont vous avez besoin, il vous suffit de nous appeler. Nous avons plus de 50 brosses différentes disponibles et pouvons les fabriquer sur-mesure selon vos spécifications précises.

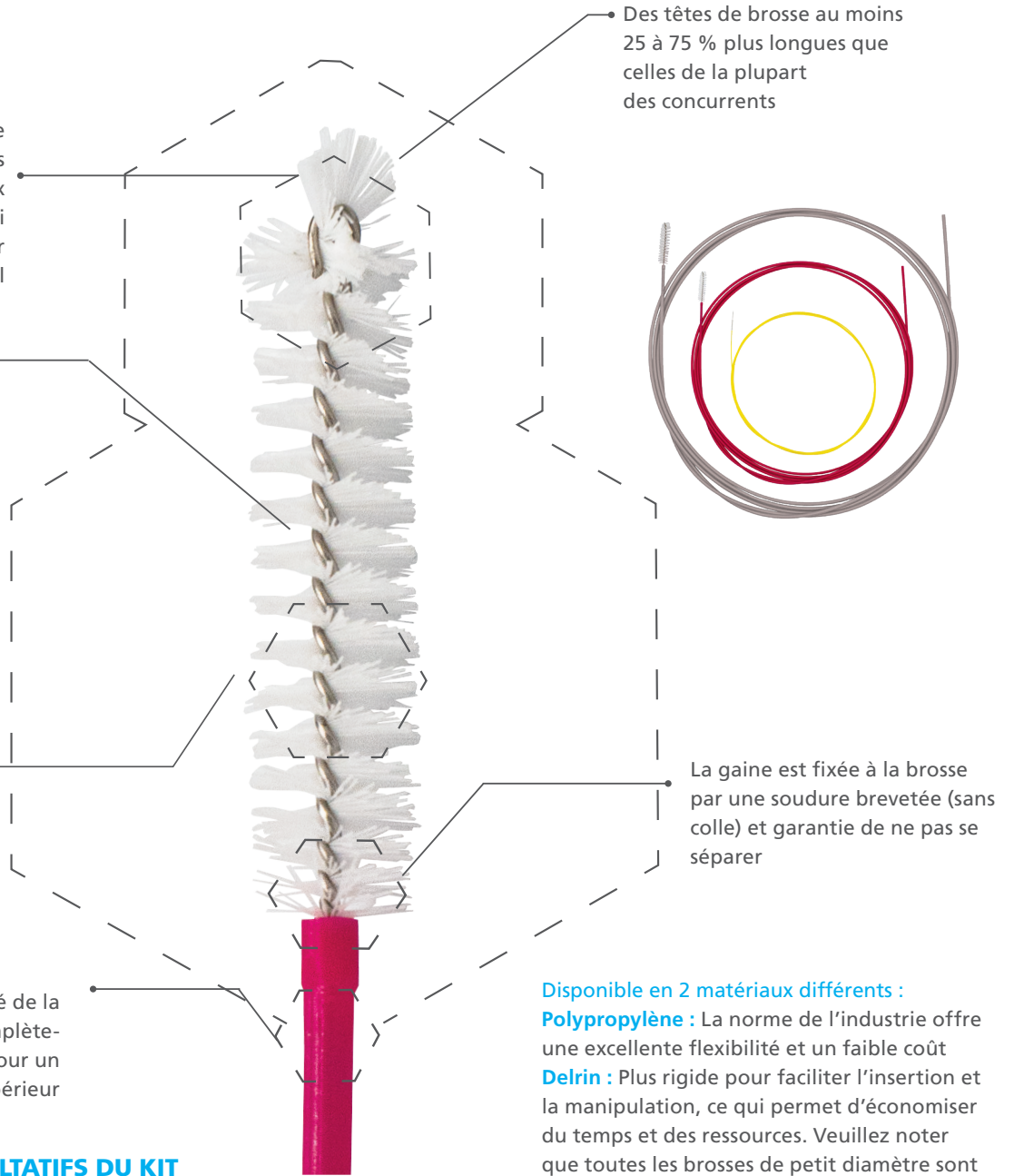

Un embout en éventail protège le canal de biopsie contre les dommages, contrairement aux embouts à bille métallique qui peuvent rayer ou se déloger complètement dans le canal

Sans Latex

Des têtes de brosse au moins 25 à 75 % plus longues que celles de la plupart des concurrents

La densité des poils et la longueur de la brosse augmentent le contact avec la surface pour un nettoyage plus efficace

La gaine est fixée à la brosse par une soudure brevetée (sans colle) et garantie de ne pas se séparer

Pas de manche à l'extrémité de la brosse pour qu'elle passe complètement dans le canal pour un nettoyage supérieur

Disponible en 2 matériaux différents :  
**Polypropylène** : La norme de l'industrie offre une excellente flexibilité et un faible coût  
**Delrin** : Plus rigide pour faciliter l'insertion et la manipulation, ce qui permet d'économiser du temps et des ressources. Veuillez noter que toutes les brosses de petit diamètre sont proposées exclusivement avec Delrin.

## LES COMPLÉMENTS FACULTATIFS DU KIT

AJOUTER LE SUFFIXE :


« F » pour recevoir un ensemble avec notre éponge plate (emballage : boîte de 40). Applicable sur certains modèles seulement, appelez-nous pour plus de détails.

« K » pour recevoir un ensemble avec la brosse de nettoyage à usage unique pour valve/contrôle 5/11 à double extrémité (article n° 27-57787).

Applicable sur tous les modèles.

« FK » pour recevoir à la fois l'éponge et les brosses de nettoyage de la valve.

## SÉRIES 333 ET 311

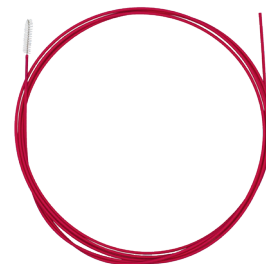

### SÉLECTION DE PRODUITS

#### BROSSES CYLINDRIQUES 5 MM - GAINÉ Ø 1,85 MM - POLYPROPYLENE ROSE VIF

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINÉ (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
311-23050	90" / 230 cm	0,94" / 24 mm	0,20" / 5 mm	0,073" / 1,85 mm	Simple
311-23050-2	90" / 230 cm	0,94" / 24 mm	0,20" / 5 mm	0,073" / 1,85 mm	Double
311-18050	70" / 180 cm	0,94" / 24 mm	0,20" / 5 mm	0,073" / 1,85 mm	Simple
311-10050	39" / 100 cm	0,94" / 24 mm	0,20" / 5 mm	0,073" / 1,85 mm	Simple


EMBALLAGE : 50 / boîte

#### BROSSES CONIQUES 5/6 MM - GAINÉ Ø 1,85 MM - POLYPROPYLENE ROSE VIF

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINÉ (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
333-23056	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20", 0,24" / 5, 6 mm	0,073" / 1,85 mm	Simple
333-23056-2	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20", 0,24" / 5, 6 mm	0,073" / 1,85 mm	Double

EMBALLAGE : 50 / boîte

## SÉRIES 300 ET 322

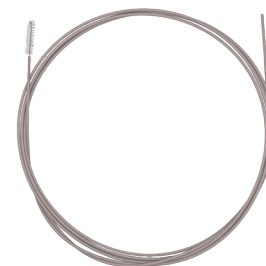

### SÉLECTION DE PRODUITS

#### BROSSES CYLINDRIQUES 5 MM - GAINÉ Ø 1,75 MM - DELRIN GRIS MÉTALLIQUE

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINÉ (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
300-18050	70" / 180 cm	0,79" / 20 mm	0,20" / 5 mm	0,070" / 1,75 mm	Simple
300-23050	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20" / 5 mm	0,070" / 1,75 mm	Simple
300-23050-2	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20" / 5 mm	0,070" / 1,75 mm	Double

EMBALLAGE : 50 / boîte


#### BROSSES CONIQUES 5/6 MM - GAINÉ Ø 1,75 MM - DELRIN GRIS MÉTALLIQUE

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINÉ (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
322-23056	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20", 0,24" / 5, 6 mm	0,070" / 1,75 mm	Simple
322-23056-2	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20", 0,24" / 5, 6 mm	0,070" / 1,75 mm	Double

EMBALLAGE : 50 / boîte



## SÉRIES 344

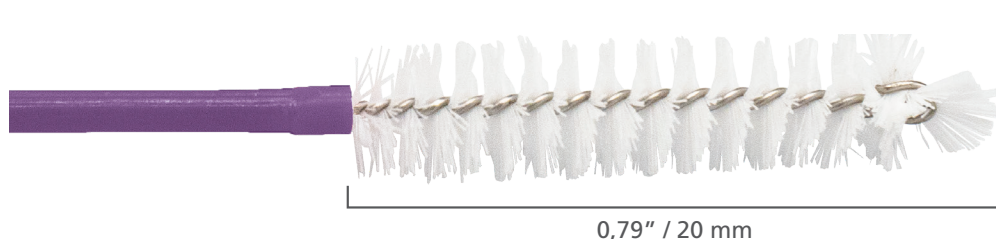


### SÉLECTION DE PRODUITS

#### BROSSES CYLINDRIQUES 3 MM - GAINÉ Ø 1,55 MM - DELRIN VIOLET MÉTALLIQUE

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINÉ (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
344-23030	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,12" / 3 mm	0,060" / 1,55 mm	Simple
344-18030	70" / 180 cm	0,79" / 20 mm	0,12" / 3 mm	0,060" / 1,55 mm	Simple
344-10030	39" / 100 cm	0,79" / 20 mm	0,12" / 3 mm	0,060" / 1,55 mm	Simple

EMBALLAGE : 50 / boîte

## SÉRIES 35

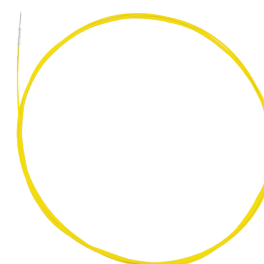

### SÉLECTION DE PRODUITS

#### BROSSES CYLINDRIQUES 2,5 MM - GAINÉ Ø 1,00 MM - DELRIN JAUNE

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINÉ (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
35-23025	90" / 230 cm	0,59" / 15 mm	0,098" / 2,5 mm	0,039" / 1,00 mm	Simple
35-12025	47,2" / 120 cm	0,59" / 15 mm	0,098" / 2,5 mm	0,039" / 1,00 mm	Simple

EMBALLAGE : 50 / boîte

#### BROSSES CYLINDRIQUES 2 MM - GAINÉ Ø 1,00 MM - DELRIN JAUNE

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINÉ (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
35-23020	90" / 230 cm	0,59" / 15 mm	0,079" / 2,0 mm	0,039" / 1,00 mm	Simple
35-12020	47,2" / 120 cm	0,59" / 15 mm	0,079" / 2,0 mm	0,039" / 1,00 mm	Simple
35-18020	70,8" / 180 cm	0,59" / 15 mm	0,079" / 2,0 mm	0,039" / 1,00 mm	Simple


EMBALLAGE : 50 / boîte

# BATRIK BROSSES POUR VALVE/CONTRÔLE


27-05197



27-57787

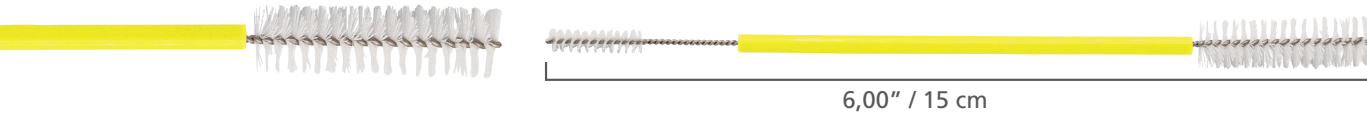

40-18511

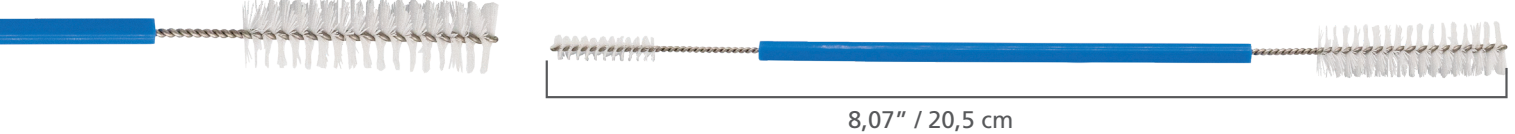

36-10010



27-15311




## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE 1	LONGUEUR DE LA BROSSE 2	BROSSE 1 (Ø)	BROSSE 2 (Ø)
<b>27-05197</b>	Double trompette 5/7 Couleur blanche	5,00"/13 cm	0,20"/5 mm	1,00"/25 mm	0,20"/5 mm	0,28"/7 mm
EMBALLAGE : sac de 3 (usage unique recommandé). EMBALLAGE EN VOLUME : sac de 50 unités utiliser le n° d'article # 27-05197-50						
<b>27-57787</b>	Double universelle 5/11 Couleur jaune	6,00"/15 cm	1,18"/30 mm	0,79"/20 mm	0,43"/11 mm	0,20"/5 mm
EMBALLAGE : sac de 3 (usage unique recommandé). EMBALLAGE EN VOLUME : sac de 50 unités utiliser le n° d'article # 27-57787-50						
<b>40-18511</b>	Double universelle 5/11 Extra longue couleur bleue	8,07"/20,5 cm	1,57"/40 mm	0,79"/20 mm	0,43"/11 mm	0,20"/5 mm
EMBALLAGE : sac de 3 (réutilisable et pouvant être stérilisé à la vapeur). EMBALLAGE EN VOLUME : sac de 50 unités utiliser article # 40-18511-50						
<b>36-10010</b>	Une seule grande extrémité Couleur rouge	4,3"/11 cm	1,57"/40 mm	S. o.	0,39"/10 mm	S. o.
EMBALLAGE : sac de 3 (usage unique recommandé). EMBALLAGE EN VOLUME : sac de 50 unités utiliser le n° d'article # 36-10010-50						
<b>27-15311</b>	Une seule grande extrémité Couleur bleue	4"/10,3 cm	1,57"/40 mm	S. o.	0,39"/10 mm	S. o.
EMBALLAGE : sac de 3 (usage unique recommandé). EMBALLAGE EN VOLUME : sac de 50 unités utiliser le n° d'article # 27-15311-50						

BATRIK


# BROSSES DE NETTOYAGE EXTERNE V-BRUSHES

Nos brosses de nettoyage externe pour endoscopes/instruments optiques offrent d'excellentes capacités de nettoyage. Avec leurs poils en forme de U uniques et leur conception innovante, nos brosses sont l'outil ultime pour nettoyer l'extérieur de vos instruments endoscopiques. Dépourvues d'extrémités pointues ou métalliques pouvant rayer ou endommager des équipements de valeur, les modèles à usage unique et réutilisables ne contiennent pas de latex et sont dotés de poignées ergonomiques.

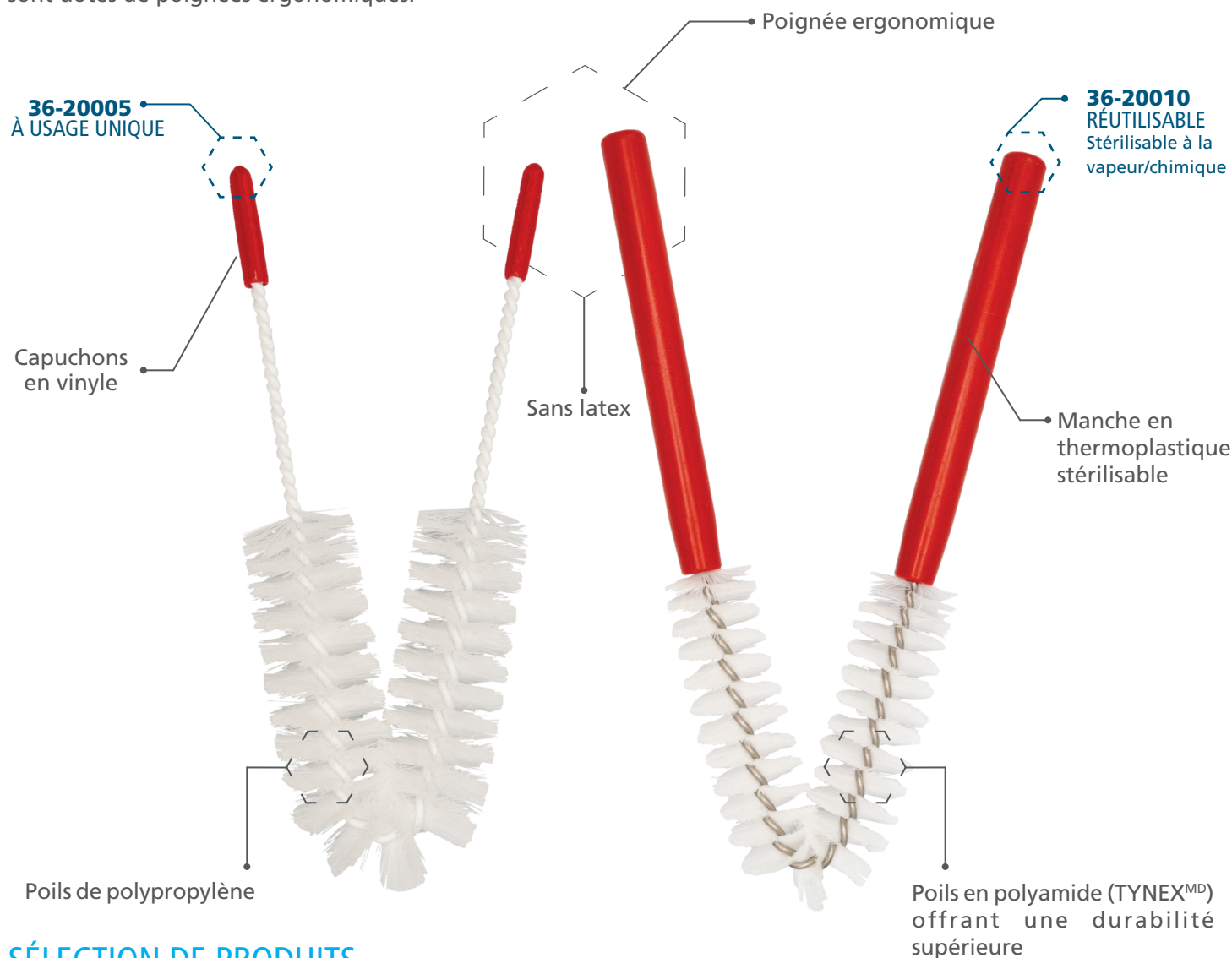

## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR DE LA BROSSÉ/(Ø)	LONGUEUR DE LA POIGNÉE (Ø)	LONGUEUR TOTALE	EMBALLAGE
<b>36-20005</b>	Brosse de nettoyage externe à usage unique	70 mm / 25 mm	80 mm / 3 mm	150 mm	50 / boîte
<b>36-20010</b>	Brosse de nettoyage externe réutilisable	90 mm / 25 mm	120 mm / 12 mm	210 mm	3 / sachet

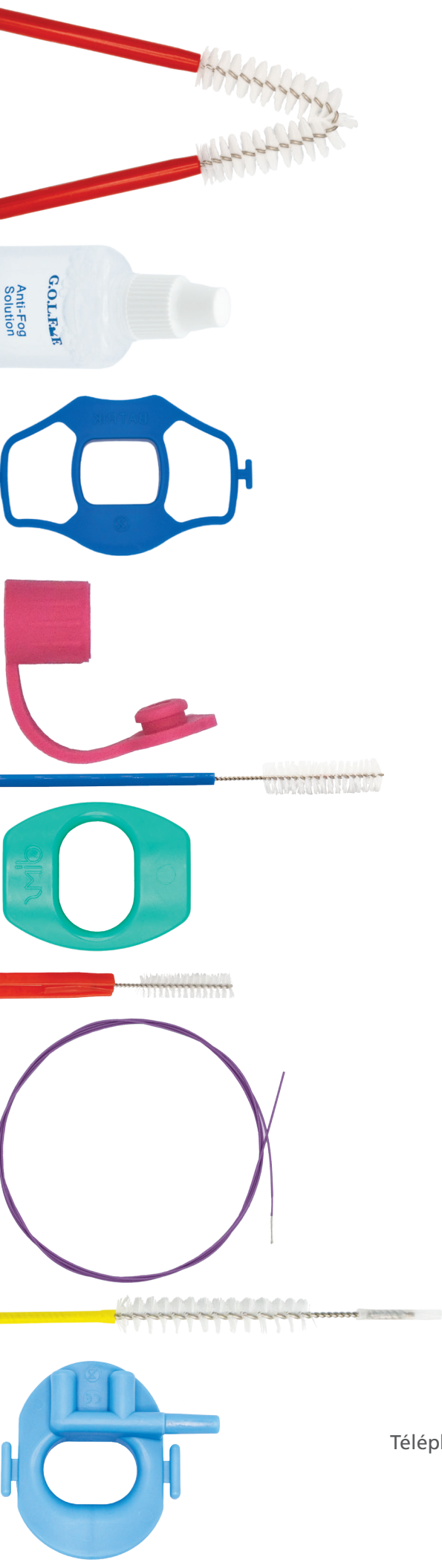

SURGMED GROUP

2165 46th Ave., Lachine, Quebec H8T 2P1  
Téléphone : +1 514-631-7988 | Sans frais : 800-661-5432 | Téléc. : +1 514-631-9083  
Courriel : [info@surgmed.com](mailto:info@surgmed.com) | Site Web : [www.batrik.com](http://www.batrik.com)