




# GAMME DE **BROSSES**

Créée en 1997. Fièrement canadienne.   
Produits commercialisés dans plus de 85  
pays dans le monde.

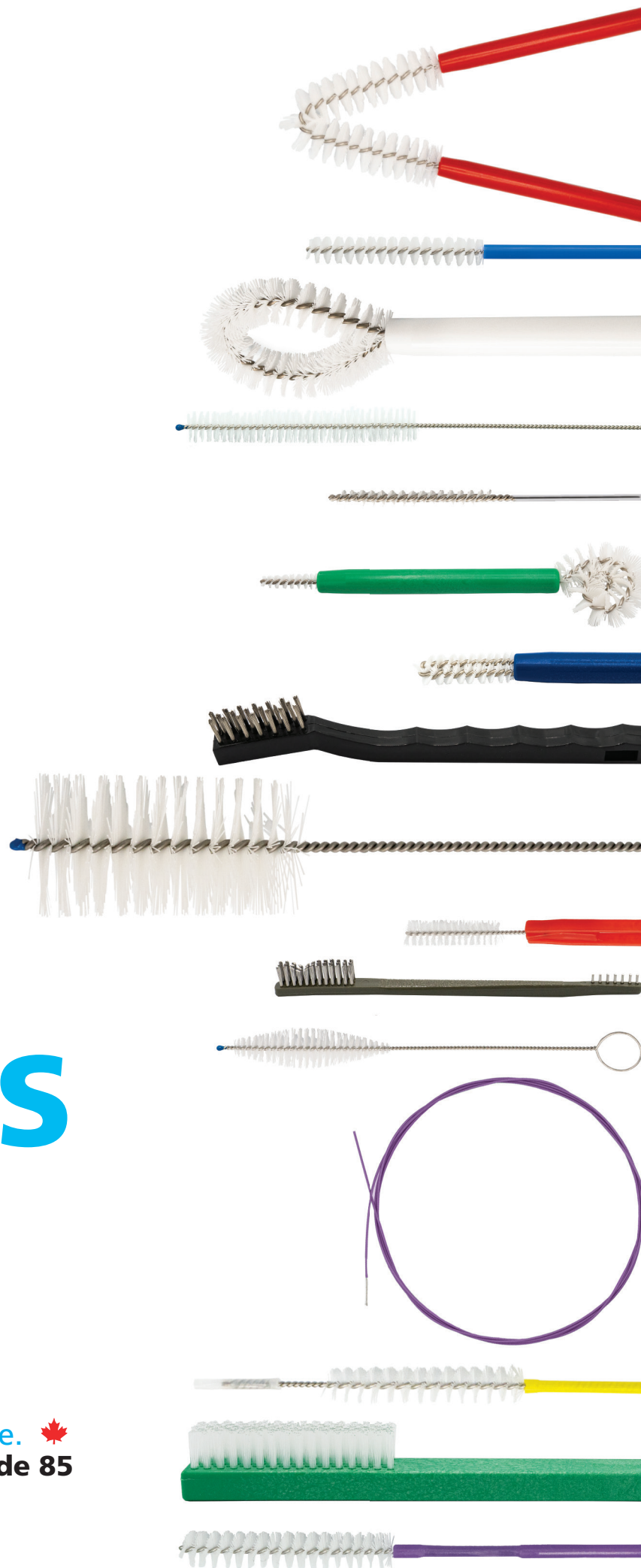

# BATRIK

# BROSSES MÉTALLIQUES ARC<sup>MC</sup>

## À USAGE UNIQUE ET RÉUTILISABLES

Vous avez le choix avec nos brosses métalliques ARC<sup>MC</sup>. Nos brosses à usage unique et réutilisables sont disponibles dans des variétés souples et rigides et dans une multitude de tailles. Les brosses métalliques ARC<sup>MC</sup> sont garanties pour durer plus longtemps que les fils torsadés et préserver l'intégrité de vos précieux instruments.

### CONSEILS POUR LE CHOIX DES BROSSES :

#### SPÉCIFICATIONS DES INSTRUMENTS

##### Quelle est la longueur maximale du ou des instruments à nettoyer?

Ajoutez au moins 5 cm (2") à cette longueur, afin d'avoir une longueur suffisante pour travailler.

##### Quel est le diamètre intérieur de l'instrument?

Ajoutez au maximum 3 mm (0,125") pour déterminer le diamètre du poil afin d'assurer un nettoyage efficace. Le diamètre du poil doit être légèrement supérieur au diamètre du tube intérieur. Les poils trop gros se courbent trop et ne nettoient pas efficacement.

#### SÉLECTION DES BROSSES

Il vous suffit de trouver dans notre catalogue la section qui correspond le mieux à la longueur et au diamètre de votre instrument. En règle générale, si votre brosse actuelle mesure 20,32 cm (8") de long et que nous ne proposons que 25,4 cm (10") de long avec le diamètre requis, cela est tout à fait acceptable.


Dans de nombreux cas, nos brosses métalliques ARC<sup>MC</sup> auront plus de poils sur la brosse. Par exemple, de nombreuses brosses de 5 mm (0,19") de diamètre ne font que 2,5 cm (1") de long. Chez Batrik, nous nous sommes efforcés de fournir la plus grande quantité de poils pour assurer le nettoyage le plus efficace possible.

#### BROSSES MÉTALLIQUES PERSONNALISABLES


Un aspect unique des brosses métalliques à usage unique ARC<sup>MC</sup> est qu'elles peuvent être personnalisées à n'importe quelle longueur :

- Jusqu'à 2 000 mm pour les brosses métalliques sur gaines en plastique semi-rigides, brosses rigides de 5 à 20 mm de diamètre
- Aucune limite de longueur pour les brosses métalliques sur des gaines en plastique souples, brosses souples de 2 à 5 mm de diamètre.

### RIGIDE

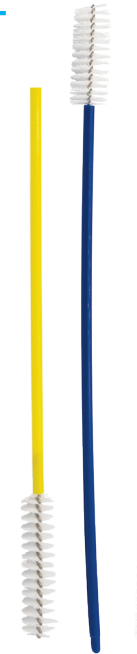

### FLEXIBLE

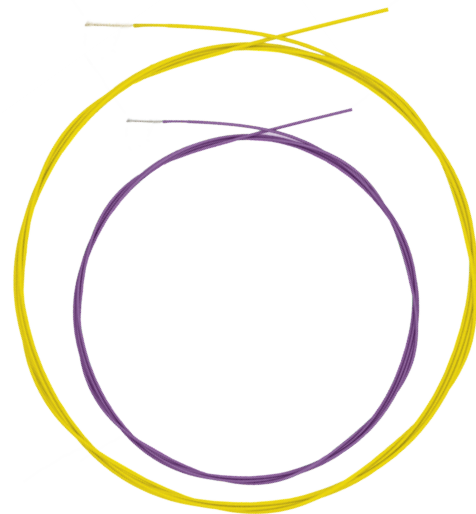

**BROSSES MÉTALLIQUES À UNE SEULE EXTRÉMITÉ DE 12" / 30 CM**

|                                    | N° D'ARTICLE<br>USAGE UNIQUE | N° D'ARTICLE<br>RÉUTILISABLE | COULEUR | LONGUEUR<br>TOTALE | BROSSE (Ø)      | LONGUEUR DE<br>LA BROSSE | GAINE (Ø)       |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------|--------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| <b>FLEXIBLE</b><br>BROSSE ET GAINE | <b>41-31502-S</b>            | <b>41-31502</b>              | Blanc   | 12,401" / 31,5 cm  | 0,078" / 2 mm   | 0,59" / 15 mm            | 0,39" / 1 mm    |
|                                    | <b>41-32503-S</b>            | <b>41-32503</b>              | Jaune   | 12,795" / 32,5 cm  | 0,118" / 3 mm   | 0,98" / 25 mm            | 0,39" / 1 mm    |
|                                    | <b>411-32504-S</b>           | <b>411-32504</b>             | Lavande | 12,795" / 32,5 cm  | 0,157" / 4 mm   | 0,98" / 25 mm            | 0,61" / 1,55 mm |
|                                    | <b>411-32505-S</b>           | <b>411-32505</b>             | Gris    | 12,795" / 32,5 cm  | 0,19" / 5 mm    | 0,98" / 25 mm            | 0,68" / 1,75 mm |
| <b>RIGIDE</b><br>BROSSE ET GAINE   | <b>41-35005-S</b>            | <b>41-35005</b>              | Blanc   | 13,779" / 35 cm    | 0,19" / 5 mm    | 1,968" / 50 mm           | 0,118" / 3 mm   |
|                                    | <b>41-35006-S</b>            | <b>41-35006</b>              | Vert    | 13,779" / 35 cm    | 0,23" / 6 mm    | 1,968" / 50 mm           | 0,118" / 3 mm   |
|                                    | <b>41-35008-S</b>            | <b>41-35008</b>              | Bleu    | 13,779" / 35 cm    | 0,31" / 8 mm    | 1,968" / 50 mm           | 0,157" / 4 mm   |
|                                    | <b>41-35010-S</b>            | <b>41-35010</b>              | Rouge   | 13,779" / 35 cm    | 0,39" / 10 mm   | 1,968" / 50 mm           | 0,157" / 4 mm   |
|                                    | <b>41-35012-S</b>            | <b>41-35012</b>              | Jaune   | 13,779" / 35 cm    | 0,49" / 12,5 mm | 1,968" / 50 mm           | 0,157" / 4 mm   |
|                                    | <b>41-35015-S</b>            | <b>41-35015</b>              | Vert    | 13,779" / 35 cm    | 0,59" / 15 mm   | 1,968" / 50 mm           | 0,228" / 5,8 mm |
|                                    | <b>41-35020-S</b>            | <b>41-35020</b>              | Bleu    | 13,779" / 35 cm    | 0,78" / 20 mm   | 1,968" / 50 mm           | 0,228" / 5,8 mm |

EMBALLAGE : Usage unique: sac de 20 / Réutilisable : sac de 3

**BROSSES MÉTALLIQUES À UNE SEULE EXTRÉMITÉ DE 18" / 45 CM**

|                                    | N° D'ARTICLE<br>USAGE UNIQUE | N° D'ARTICLE<br>RÉUTILISABLE | COULEUR | LONGUEUR<br>TOTALE | BROSSE (Ø)      | LONGUEUR DE<br>LA BROSSE | GAINE (Ø)       |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------|--------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| <b>FLEXIBLE</b><br>BROSSE ET GAINE | <b>41-46502-S</b>            | <b>41-46502</b>              | Blanc   | 18,307" / 46,5 cm  | 0,078" / 2 mm   | 0,59" / 15 mm            | 0,39" / 1 mm    |
|                                    | <b>41-47503-S</b>            | <b>41-47503</b>              | Jaune   | 18,7" / 47,5 cm    | 0,118" / 3 mm   | 0,98" / 25 mm            | 0,39" / 1 mm    |
|                                    | <b>411-47504-S</b>           | <b>411-47504</b>             | Lavande | 18,7" / 47,5 cm    | 0,157" / 4 mm   | 0,98" / 25 mm            | 0,61" / 1,55 mm |
|                                    | <b>411-47505-S</b>           | <b>411-47505</b>             | Gris    | 18,7" / 47,5 cm    | 0,19" / 5 mm    | 0,98" / 25 mm            | 0,68" / 1,75 mm |
| <b>RIGIDE</b><br>BROSSE ET GAINE   | <b>41-50005-S</b>            | <b>41-50005</b>              | Blanc   | 19,685" / 50 cm    | 0,19" / 5 mm    | 1,968" / 50 mm           | 0,118" / 3 mm   |
|                                    | <b>41-50006-S</b>            | <b>41-50006</b>              | Vert    | 19,685" / 50 cm    | 0,23" / 6 mm    | 1,968" / 50 mm           | 0,118" / 3 mm   |
|                                    | <b>41-50008-S</b>            | <b>41-50008</b>              | Bleu    | 1,685" / 50 cm     | 0,31" / 8 mm    | 1,968" / 50 mm           | 0,157" / 4 mm   |
|                                    | <b>41-50010-S</b>            | <b>41-50010</b>              | Rouge   | 19,685" / 50 cm    | 0,39" / 10 mm   | 1,968" / 50 mm           | 0,157" / 4 mm   |
|                                    | <b>41-50012-S</b>            | <b>41-50012</b>              | Jaune   | 19,685" / 50 cm    | 0,49" / 12,5 mm | 1,968" / 50 mm           | 0,157" / 4 mm   |
|                                    | <b>41-50015-S</b>            | <b>41-50015</b>              | Vert    | 19,685" / 50 cm    | 0,59" / 15 mm   | 1,968" / 50 mm           | 0,228" / 5,8 mm |
|                                    | <b>41-50020-S</b>            | <b>41-50020</b>              | Bleu    | 19,685" / 50 cm    | 0,78" / 20 mm   | 1,968" / 50 mm           | 0,228" / 5,8 mm |

EMBALLAGE : Usage unique : sac de 20 / Réutilisable : sac de 3


**BROSSES MÉTALLIQUES À UNE SEULE EXTRÉMITÉ DE 24" / 60 CM**

|                                    | N° D'ARTICLE<br>USAGE UNIQUE | N° D'ARTICLE<br>RÉUTILISABLE | COULEUR | LONGUEUR<br>TOTALE | BROSSE (Ø)      | LONGUEUR DE<br>LA BROSSE | GAINÉ (Ø)       |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------|--------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| <b>FLEXIBLE</b><br>BROSSE ET GAINÉ | <b>41-61502-S</b>            | <b>41-61502</b>              | Blanc   | 24,212" / 61,5 cm  | 0,078" / 2 mm   | 0,59" / 15 mm            | 0,39" / 1mm     |
|                                    | <b>41-62503-S</b>            | <b>41-62503</b>              | Jaune   | 24,6" / 62,5 cm    | 0,118" / 3 mm   | 0,98" / 25 mm            | 0,39" / 1mm     |
|                                    | <b>411-62504-S</b>           | <b>411-62504</b>             | Lavande | 24,6" / 62,5 cm    | 0,157" / 4 mm   | 0,98" / 25 mm            | 0,61" / 1,55mm  |
|                                    | <b>411-62505-S</b>           | <b>411-62505</b>             | Gris    | 24,6" / 62,5 cm    | 0,19" / 5 mm    | 0,98" / 25 mm            | 0,68" / 1,75mm  |
| <b>RIGIDE</b><br>BROSSE ET GAINÉ   | <b>41-65005-S</b>            | <b>41-65005</b>              | Blanc   | 25,59" / 65 cm     | 0,19" / 5 mm    | 1,968" / 50 mm           | 0,118" / 3mm    |
|                                    | <b>41-65006-S</b>            | <b>41-65006</b>              | Vert    | 25,59" / 65 cm     | 0,23" / 6 mm    | 1,968" / 50 mm           | 0,118" / 3mm    |
|                                    | <b>41-65008-S</b>            | <b>41-65008</b>              | Bleu    | 25,59" / 65 cm     | 0,31" / 8 mm    | 1,968" / 50 mm           | 0,157" / 4 mm   |
|                                    | <b>41-65010-S</b>            | <b>41-65010</b>              | Rouge   | 25,59" / 65 cm     | 0,39" / 10 mm   | 1,968" / 50 mm           | 0,157" / 4 mm   |
|                                    | <b>41-65012-S</b>            | <b>41-65012</b>              | Jaune   | 25,59" / 65 cm     | 0,49" / 12,5 mm | 1,968" / 50 mm           | 0,157" / 4 mm   |
|                                    | <b>41-65015-S</b>            | <b>41-65015</b>              | Vert    | 25,59" / 65 cm     | 0,59" / 15 mm   | 1,968" / 50 mm           | 0,228" / 5,8 mm |
|                                    | <b>41-65020-S</b>            | <b>41-65020</b>              | Bleu    | 25,59" / 65 cm     | 0,78" / 20 mm   | 1,968" / 50 mm           | 0,228" / 5,8 mm |

**EMBALLAGE : Usage unique : sac de 20 / Réutilisable : sac de 3**
**BROSSES MÉTALLIQUES À UNE SEULE EXTRÉMITÉ DE 30" / 75 CM**

|                                    | N° D'ARTICLE<br>USAGE UNIQUE | N° D'ARTICLE<br>RÉUTILISABLE | COULEUR | LONGUEUR<br>TOTALE | BROSSE (Ø)      | LONGUEUR<br>DE LA BROSSE | GAINÉ (Ø)       |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------|--------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| <b>FLEXIBLE</b><br>BROSSE ET GAINÉ | <b>41-76502-S</b>            | <b>41-76502</b>              | Blanc   | 30,118" / 76,5 cm  | 0,078" / 2 mm   | 0,59" / 15 mm            | 0,39" / 1 mm    |
|                                    | <b>41-77503-S</b>            | <b>41-77503</b>              | Jaune   | 30,511" / 77,5 cm  | 0,118" / 3 mm   | 0,98" / 25 mm            | 0,39" / 1 mm    |
|                                    | <b>411-77504-S</b>           | <b>411-77504</b>             | Lavande | 30,511" / 77,5 cm  | 0,157" / 4 mm   | 0,98" / 25 mm            | 0,61" / 1,55 mm |
|                                    | <b>411-77505-S</b>           | <b>411-77505</b>             | Gris    | 30,511" / 77,5 cm  | 0,19" / 5 mm    | 0,98" / 25 mm            | 0,68" / 1,75 mm |
| <b>RIGIDE</b><br>BROSSE ET GAINÉ   | <b>41-80005-S</b>            | <b>41-80005</b>              | Blanc   | 31,496" / 80 cm    | 0,19" / 5 mm    | 1,968" / 50 mm           | 0,118" / 3 mm   |
|                                    | <b>41-80006-S</b>            | <b>41-80006</b>              | Vert    | 31,496" / 80 cm    | 0,23" / 6 mm    | 1,968" / 50 mm           | 0,118" / 3 mm   |
|                                    | <b>41-80008-S</b>            | <b>41-80008</b>              | Bleu    | 31,496" / 80 cm    | 0,31" / 8 mm    | 1,968" / 50 mm           | 0,157" / 4 mm   |
|                                    | <b>41-80010-S</b>            | <b>41-80010</b>              | Rouge   | 31,496" / 80 cm    | 0,39" / 10 mm   | 1,968" / 50 mm           | 0,157" / 4 mm   |
|                                    | <b>41-80012-S</b>            | <b>41-80012</b>              | Jaune   | 31,496" / 80 cm    | 0,49" / 12,5 mm | 1,968" / 50 mm           | 0,157" / 4 mm   |
|                                    | <b>41-80015-S</b>            | <b>41-80015</b>              | Vert    | 31,496" / 80 cm    | 0,59" / 15 mm   | 1,968" / 50 mm           | 0,228" / 5,8 mm |
|                                    | <b>41-80020-S</b>            | <b>41-80020</b>              | Bleu    | 31,496" / 80 cm    | 0,78" / 20 mm   | 1,968" / 50 mm           | 0,228" / 5,8 mm |

**EMBALLAGE : Usage unique : sac de 20 / Réutilisable : sac de 3**

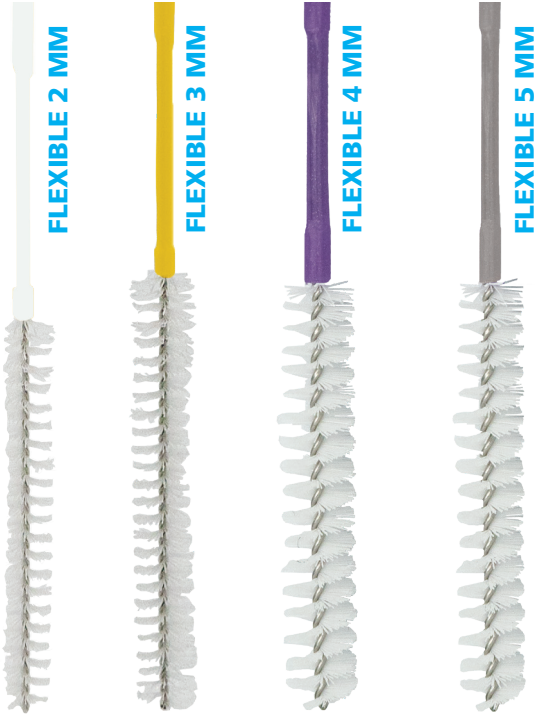


**FLEXIBLE 2 MM**

**FLEXIBLE 3 MM**


**FLEXIBLE 4 MM**

**FLEXIBLE 5 MM**

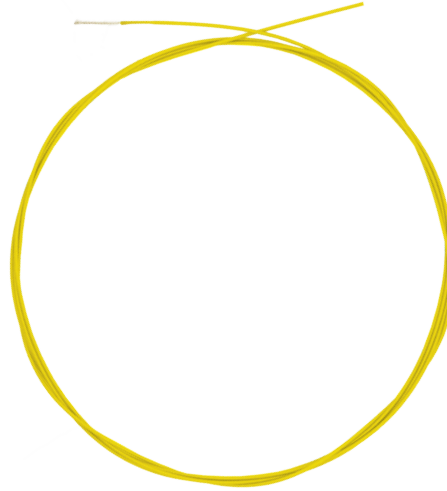

## FLEXIBLE

Diamètre (Ø) de la brosse flexible allant de 2 mm à 5 mm

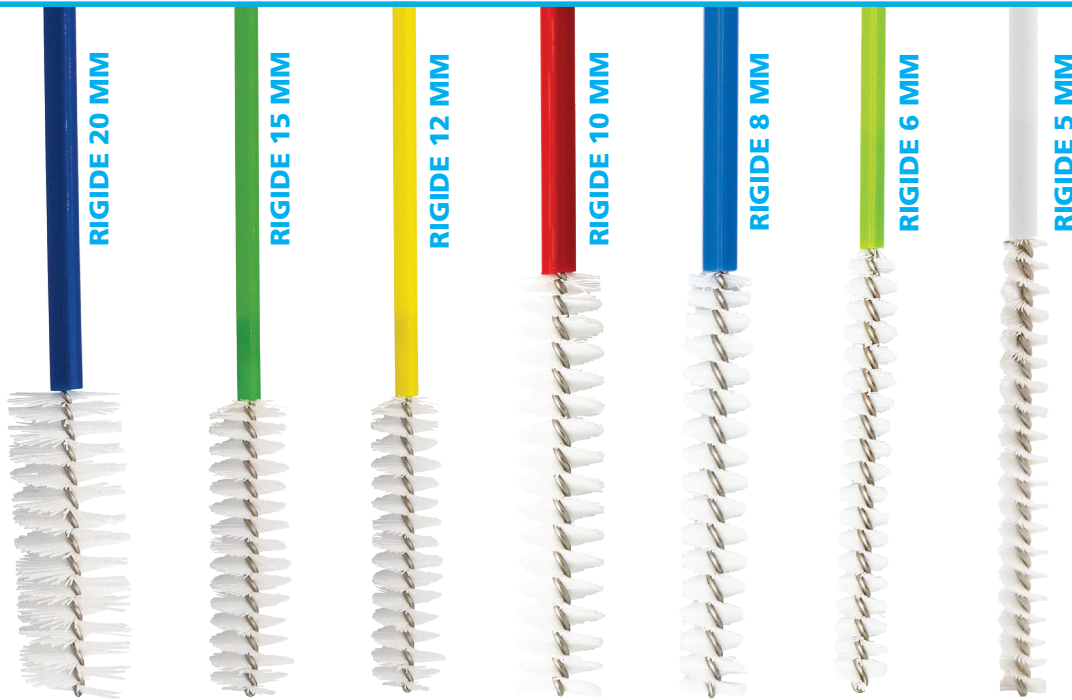

**RIGIDE 20 MM**

**RIGIDE 15 MM**

**RIGIDE 12 MM**

**RIGIDE 10 MM**

**RIGIDE 8 MM**

**RIGIDE 6 MM**

**RIGIDE 5 MM**

## RIGIDE

Diamètre (Ø) de la brosse rigide allant de 5 mm à 20 mm

### SYSTÈME DE SÉLECTION DES BROSSES (Taille Réelle)

2 mm  
0,078"

3 mm  
0,118"

4 mm  
0,157"

5 mm  
0,196"

6 mm  
0,236"

8 mm  
0,314"

10 mm  
0,394"

12 mm  
0,472"

15 mm  
0,591"

20 mm  
0,787"



BATRIK

# BROSSES MÉTALLIQUES DOUBLES RÉUTILISABLES ARC<sup>MC</sup>

## ASYMÉTRIQUES

### BROSSES MÉTALLIQUES ASYMÉTRIQUES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 14" / 35 CM

| N° D'ARTICLE | COULEUR | LONGUEUR TOTALE | BROSSE 1 (Ø)  | BROSSE 2 (Ø)    | LONGUEUR DE LA BROSSE | GAINÉ (Ø)       |
|--------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 40-35056     | Blanc   | 13,779" / 35 cm | 0,19" / 5 mm  | 0,23" / 6 mm    | 1,968" / 50 mm        | 0,118" / 3 mm   |
| 40-35810     | Bleu    | 13,779" / 35 cm | 0,31" / 8 mm  | 0,39" / 10 mm   | 1,968" / 50 mm        | 0,157" / 4 mm   |
| 40-35112     | Jaune   | 13,779" / 35 cm | 0,39" / 10 mm | 0,49" / 12,5 mm | 1,968" / 50 mm        | 0,157" / 4 mm   |
| 40-35152     | Vert    | 13,779" / 35 cm | 0,59" / 15 mm | 0,78" / 20 mm   | 1,968" / 50 mm        | 0,228" / 5,8 mm |

EMBALLAGE : sac de 3

### BROSSES MÉTALLIQUES ASYMÉTRIQUES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 20" / 50 CM

| N° D'ARTICLE | COULEUR | LONGUEUR TOTALE | BROSSE 1 (Ø)  | BROSSE 2 (Ø)    | LONGUEUR DE LA BROSSE | GAINÉ (Ø)       |
|--------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 40-50056     | Blanc   | 19,685" / 50 cm | 0,19" / 5 mm  | 0,23" / 6 mm    | 1,968" / 50 mm        | 0,118" / 3 mm   |
| 40-50810     | Bleu    | 19,685" / 50 cm | 0,31" / 8 mm  | 0,39" / 10 mm   | 1,968" / 50 mm        | 0,157" / 4 mm   |
| 40-50112     | Jaune   | 19,685" / 50 cm | 0,39" / 10 mm | 0,49" / 12,5 mm | 1,968" / 50 mm        | 0,157" / 4 mm   |
| 40-50152     | Vert    | 19,685" / 50 cm | 0,59" / 15 mm | 0,78" / 20 mm   | 1,968" / 50 mm        | 0,228" / 5,8 mm |

EMBALLAGE : sac de 3

### BROSSES MÉTALLIQUES ASYMÉTRIQUES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 26" / 65 CM

| N° D'ARTICLE | COULEUR | LONGUEUR TOTALE | BROSSE 1 (Ø)  | BROSSE 2 (Ø)    | LONGUEUR DE LA BROSSE | GAINÉ (Ø)       |
|--------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 40-65056     | Blanc   | 25,59" / 65 cm  | 0,19" / 5 mm  | 0,23" / 6 mm    | 1,968" / 50 mm        | 0,118" / 3 mm   |
| 40-65810     | Bleu    | 25,59" / 65 cm  | 0,31" / 8 mm  | 0,39" / 10 mm   | 1,968" / 50 mm        | 0,157" / 4 mm   |
| 40-65112     | Jaune   | 25,59" / 65 cm  | 0,39" / 10 mm | 0,49" / 12,5 mm | 1,968" / 50 mm        | 0,157" / 4 mm   |
| 40-65152     | Vert    | 25,59" / 65 cm  | 0,59" / 15 mm | 0,78" / 20 mm   | 1,968" / 50 mm        | 0,228" / 5,8 mm |

EMBALLAGE : sac de 3

### BROSSES MÉTALLIQUES ASYMÉTRIQUES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 31" / 80 CM

| N° D'ARTICLE | COULEUR | LONGUEUR TOTALE | BROSSE 1 (Ø)  | BROSSE 2 (Ø)    | LONGUEUR DE LA BROSSE | GAINÉ (Ø)       |
|--------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 40-80056     | Blanc   | 31,496" / 80 cm | 0,19" / 5 mm  | 0,23" / 6 mm    | 1,968" / 50 mm        | 0,118" / 3 mm   |
| 40-80810     | Bleu    | 31,496" / 80 cm | 0,31" / 8 mm  | 0,39" / 10 mm   | 1,968" / 50 mm        | 0,157" / 4 mm   |
| 40-80112     | Jaune   | 31,496" / 80 cm | 0,39" / 10 mm | 0,49" / 12,5 mm | 1,968" / 50 mm        | 0,157" / 4 mm   |
| 40-80152     | Vert    | 31,496" / 80 cm | 0,59" / 15 mm | 0,78" / 20 mm   | 1,968" / 50 mm        | 0,228" / 5,8 mm |

EMBALLAGE : sac de 3

**BATRIK**

# BROSSES MÉTALLIQUES DOUBLE RÉUTILISABLE ARC<sup>MC</sup> SYMÉTRIQUES

## BROSSES MÉTALLIQUES SYMÉTRIQUES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 14" / 35 CM

| N° D'ARTICLE | COULEUR | LONGUEUR TOTALE | BROSSE 1 (Ø)    | LONGUEUR DE LA BROSSE | GAINÉ (Ø)       |
|--------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 40-35005     | Blanc   | 13,779" / 35 cm | 0,19" / 5 mm    | 1,968" / 50 mm        | 0,118" / 3 mm   |
| 40-35006     | Vert    | 13,779" / 35 cm | 0,23" / 6 mm    | 1,968" / 50 mm        | 0,118" / 3 mm   |
| 40-35008     | Bleu    | 13,779" / 35 cm | 0,31" / 8 mm    | 1,968" / 50 mm        | 0,157" / 4 mm   |
| 40-35010     | Rouge   | 13,779" / 35 cm | 0,39" / 10 mm   | 1,968" / 50 mm        | 0,157" / 4 mm   |
| 40-35012     | Jaune   | 13,779" / 35 cm | 0,49" / 12,5 mm | 1,968" / 50 mm        | 0,157" / 4 mm   |
| 40-35015     | Vert    | 13,779" / 35 cm | 0,59" / 15 mm   | 1,968" / 50 mm        | 0,228" / 5,8 mm |
| 40-35020     | Bleu    | 13,779" / 35 cm | 0,78" / 20 mm   | 1,968" / 50 mm        | 0,228" / 5,8 mm |

EMBALLAGE : sac de 3

## BROSSES MÉTALLIQUES SYMÉTRIQUES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 20" / 50 CM

| N° D'ARTICLE | COULEUR | LONGUEUR TOTALE | BROSSE 1 (Ø)    | LONGUEUR DE LA BROSSE | GAINÉ (Ø)       |
|--------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 40-50005     | Blanc   | 19,685" / 50 cm | 0,19" / 5 mm    | 1,968" / 50 mm        | 0,118" / 3 mm   |
| 40-50006     | Vert    | 19,685" / 50 cm | 0,23" / 6 mm    | 1,968" / 50 mm        | 0,118" / 3 mm   |
| 40-50008     | Bleu    | 19,685" / 50 cm | 0,31" / 8 mm    | 1,968" / 50 mm        | 0,157" / 4 mm   |
| 40-50010     | Rouge   | 19,685" / 50 cm | 0,39" / 10 mm   | 1,968" / 50 mm        | 0,157" / 4 mm   |
| 40-50012     | Jaune   | 19,685" / 50 cm | 0,49" / 12,5 mm | 1,968" / 50 mm        | 0,157" / 4 mm   |
| 40-50015     | Vert    | 19,685" / 50 cm | 0,59" / 15 mm   | 1,968" / 50 mm        | 0,228" / 5,8 mm |
| 40-50020     | Bleu    | 19,685" / 50 cm | 0,78" / 20 mm   | 1,968" / 50 mm        | 0,228" / 5,8 mm |

EMBALLAGE : sac de 3

## BROSSES MÉTALLIQUES SYMÉTRIQUES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 26" / 65 CM

| N° D'ARTICLE | COULEUR | LONGUEUR TOTALE | BROSSE 1 (Ø)    | LONGUEUR DE LA BROSSE | GAINÉ (Ø)       |
|--------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 40-65005     | Blanc   | 25,59" / 65 cm  | 0,19" / 5 mm    | 1,968" / 50 mm        | 0,118" / 3 mm   |
| 40-65006     | Vert    | 25,59" / 65 cm  | 0,23" / 6 mm    | 1,968" / 50 mm        | 0,118" / 3 mm   |
| 40-65008     | Bleu    | 25,59" / 65 cm  | 0,31" / 8 mm    | 1,968" / 50 mm        | 0,157" / 4 mm   |
| 40-65010     | Rouge   | 25,59" / 65 cm  | 0,39" / 10 mm   | 1,968" / 50 mm        | 0,157" / 4 mm   |
| 40-65012     | Jaune   | 25,59" / 65 cm  | 0,49" / 12,5 mm | 1,968" / 50 mm        | 0,157" / 4 mm   |
| 40-65015     | Vert    | 25,59" / 65 cm  | 0,59" / 15 mm   | 1,968" / 50 mm        | 0,228" / 5,8 mm |
| 40-65020     | Bleu    | 25,59" / 65 cm  | 0,78" / 20 mm   | 1,968" / 50 mm        | 0,228" / 5,8 mm |

EMBALLAGE : sac de 3

## BROSSES MÉTALLIQUES SYMÉTRIQUES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 31" / 80 CM

| N° D'ARTICLE | COULEUR | LONGUEUR TOTALE | BROSSE 1 (Ø)    | LONGUEUR DE LA BROSSE | GAINÉ (Ø)       |
|--------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 40-80005     | Blanc   | 31,496" / 80 cm | 0,19" / 5 mm    | 1,968" / 50 mm        | 0,118" / 3 mm   |
| 40-80006     | Vert    | 31,496" / 80 cm | 0,23" / 6 mm    | 1,968" / 50 mm        | 0,118" / 3 mm   |
| 40-80008     | Bleu    | 31,496" / 80 cm | 0,31" / 8 mm    | 1,968" / 50 mm        | 0,157" / 4 mm   |
| 40-80010     | Rouge   | 31,496" / 80 cm | 0,39" / 10 mm   | 1,968" / 50 mm        | 0,157" / 4 mm   |
| 40-65112     | Jaune   | 31,496" / 80 cm | 0,49" / 12,5 mm | 1,968" / 50 mm        | 0,157" / 4 mm   |
| 40-80015     | Vert    | 31,496" / 80 cm | 0,59" / 15 mm   | 1,968" / 50 mm        | 0,228" / 5,8 mm |
| 40-80020     | Bleu    | 31,496" / 80 cm | 0,78" / 20 mm   | 1,968" / 50 mm        | 0,228" / 5,8 mm |

EMBALLAGE : sac de 3

## BROSSES ASYMÉTRIQUES

5 MM

6 MM



8 MM

10 MM



10 MM

12,5 MM



15 MM

20 MM






BATRIK

# BROSSES MÉTALLIQUES TORSADÉES ANTIMICROBIENNES RÉUTILISABLES IN-BRUSH<sup>MC</sup>

Nos brosses métalliques torsadées antimicrobiennes réutilisables In-Brush<sup>MC</sup> sont conçues pour être utilisées avec les tubes d'aspiration Frazier/Baron. Les fils torsadés ont un diamètre fin/moyen tout en étant suffisamment rigides pour assurer une excellente capacité de nettoyage.

Notre large assortiment de brosses métalliques torsadées en nylon est idéal pour les instruments endoscopiques et les instruments de grand diamètre et de forme unique.

BON À SAVOIR : NOS BROSSES  
MÉTALLIQUES TORSADÉES SONT  
DOTÉES D'UNE POINTE BLEUE  
DE PROTECTION POUR PLUS DE  
SÉCURITÉ.

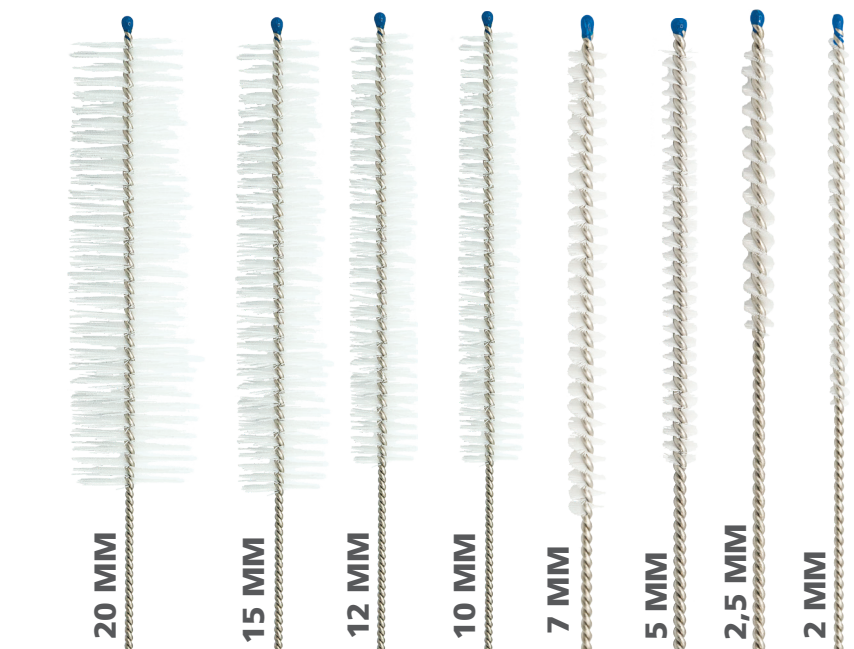

## BROSSES À TUBE D'ASPIRATION DE 10" / 250 MM FRAZIER / BARON

| N° D'ARTICLE | TAILLE | LONGUEUR DE LA BROSSE | BROSSE (Ø)       |
|--------------|--------|-----------------------|------------------|
| 21-10039     | 3 FR   | 0,5" / 12,7 mm        | 0,039" / 1 mm    |
| 21-10067     | 5 FR   | 0,5" / 12,7 mm        | 0,065" / 1,67 mm |
| 20-10059     | 5 FR   | 1" / 25,4 mm          | 0,059" / 1,50 mm |
| 20-10079     | 6 FR   | 1" / 25,4 mm          | 0,079" / 2 mm    |
| 20-10090     | 7 FR   | 1" / 25,4 mm          | 0,090" / 2,3 mm  |
| 20-10106     | 8 FR   | 1" / 25,4 mm          | 0,106" / 2,7 mm  |
| 20-10118     | 9 FR   | 1" / 25,4 mm          | 0,118" / 3 mm    |
| 20-10129     | 10 FR  | 1,5" / 38 mm          | 0,129" / 3,3 mm  |
| 20-10146     | 11 FR  | 1,5" / 38 mm          | 0,0146" / 3,7 mm |
| 20-10157     | 12 FR  | 1,5" / 38 mm          | 0,157" / 4 mm    |

EMBALLAGE : sac de 3  
Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"

## BROSSES MÉTALLIQUES TORSADÉES EN NYLON DE 12" / 305 MM

| N° D'ARTICLE | LONGUEUR DE LA BROSSE | BROSSE (Ø)     |
|--------------|-----------------------|----------------|
| 22-12078     | 2" / 50,8 mm          | 0,078" / 2 mm  |
| 22-12118     | 2" / 50,8 mm          | 0,118" / 3 mm  |
| 22-12157     | 3" / 76 mm            | 0,157" / 4 mm  |
| 22-12197     | 3" / 76 mm            | 0,197" / 5 mm  |
| 22-12236     | 3" / 76 mm            | 0,236" / 6 mm  |
| 22-12393     | 3" / 76 mm            | 0,394" / 10 mm |

EMBALLAGE : sac de 3  
Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"

### BROSSES MÉTALLIQUES TORSADÉES EN NYLON DE 16" / 406 MM

| N° D'ARTICLE | LONGUEUR DE LA BROSSE | BROSSE (Ø)     |
|--------------|-----------------------|----------------|
| 23-16197     | 2,5" / 63,5 mm        | 0,197" / 5 mm  |
| 23-16236     | 2,5" / 63,5 mm        | 0,236" / 6 mm  |
| 23-16276     | 3" / 76 mm            | 0,276" / 7 mm  |
| 23-16394     | 3" / 76 mm            | 0,394" / 10 mm |
| 23-16472     | 3" / 76 mm            | 0,472" / 12 mm |
| 23-16591     | 3" / 76 mm            | 0,591" / 15 mm |
| 23-16787     | 3" / 76 mm            | 0,787" / 20 mm |

EMBALLAGE : sac de 3

Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"

### BROSSES MÉTALLIQUES TORSADÉES EN NYLON DE 18" / 457 MM

| N° D'ARTICLE | LONGUEUR DE LA BROSSE | BROSSE (Ø)     |
|--------------|-----------------------|----------------|
| 19-18010     | 0,47" / 12 mm         | 0,039" / 1 mm  |
| 19-18015     | 0,5" / 12 mm          | 0,06" / 1,6 mm |

EMBALLAGE : sac de 3

Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"

### BROSSES MÉTALLIQUES TORSADÉES EN NYLON DE 24" / 610 MM

| N° D'ARTICLE | LONGUEUR DE LA BROSSE | BROSSE (Ø)      |
|--------------|-----------------------|-----------------|
| 24-24098     | 2,5" / 63,5 mm        | 0,098" / 2,5 mm |
| 24-24197     | 2,5" / 63,5 mm        | 0,197" / 5 mm   |
| 24-24276     | 3" / 76 mm            | 0,276" / 7 mm   |
| 24-24394     | 3" / 76 mm            | 0,394" / 10 mm  |
| 24-24472     | 3" / 76 mm            | 0,472" / 12 mm  |

EMBALLAGE : sac de 3

Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"

### BROSSES DE TRACHÉOSTOMIE

| N° D'ARTICLE | DESCRIPTION           | LONGUEUR TOTALE | LONGUEUR DE LA BROSSE | BROSSE (Ø)     |
|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| 25-08500     | Grande 6-12,3 3 / 4"  | 8" / 203 mm     | 3,75" / 95 mm         | 0,5" / 12,7 mm |
| 25-37550     | Petite 000-5,1 7 / 8" | 4" / 93 mm      | 1,88" / 48 mm         | 0,5" / 12,7 mm |

EMBALLAGE : sac de 3. Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"



### BROSSES POUR BRONCHOSCOPE

| N° D'ARTICLE | DESCRIPTION | LONGUEUR DE LA BROSSE | BROSSE (Ø) POUCES / MM |
|--------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| 26-06175     | Petite      | 6" / 152 mm           | 1,75" / 44,5 mm        |
| 26-08325     | Grande      | 8" / 203 mm           | 3,25" / 82,6 mm        |

EMBALLAGE : sac de 3

Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"

BATRIK

# MICRO-BROSSES

## EN ACIER INOXYDABLE ARC<sup>MC</sup>

Nos micro-brosses en acier inoxydable ARC<sup>MC</sup> sont parmi les plus petites brosses de l'industrie. Elles sont conçues pour nettoyer des canaux d'un diamètre intérieur allant de 0,5 mm à 1,40 mm.

- La gaine flexible en acier inoxydable ne se plie pas comme les brosses métalliques torsadées ordinaires
- Les poils en polyamide empêchent ou ralentissent la croissance bactérienne entre les stérilisations
- Réutilisables\*
- Disponibles en deux longueurs

CONSEIL : IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ D'UTILISER LA TECHNIQUE DE TRACTION AVEC CES BROSSES. IL SUFFIT D'INSÉRER D'ABORD L'EXTRÉMITÉ ÉMOUSSÉE, SANS BROSSE.



### SÉLECTION DE PRODUITS

| N° D'ARTICLE    | LONGUEUR TOTALE | TAILLE DE LA BROSSE (Ø) | LONGUEUR DE LA BROSSE | GAINE (Ø)       | EMBALLAGE |
|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|
| <b>35-03015</b> | 12" / 30 cm     | 0,06" / 1,5 mm          | 0,6" / 15 mm          | 0,02" / 0,40 mm | 6 / tube  |
| <b>35-04515</b> | 18" / 45 cm     | 0,06" / 1,5 mm          | 0,6" / 15 mm          | 0,02" / 0,40 mm | 6 / tube  |

\*Même si tous les matériaux utilisés dans la fabrication de ces brosses peuvent être réutilisés à plusieurs reprises, en raison de la nature délicate de ces brosses, la réutilisation est conditionnée par leur manipulation et leur application.

# BATRIK BROSSES PLATES POUR NETTOYAGE DES INSTRUMENTS

Nos brosses plates pour le nettoyage des instruments sont spécialement conçues pour une utilisation en milieu hospitalier pour le prénettoyage et la préparation des instruments.

- Le long manche ergonomique permet une utilisation facile
- Longueur supplémentaire de la tête de brosse (60 [±5] mm en usage unique et 75 [±5] mm en usage réutilisable)
- Les fibres transparentes de la brosse permettent de vérifier rapidement sa propreté
- La poignée en plastique ne libère aucun composant toxique
- Disponibles en 6 modèles (4 réutilisables/autoclavables et 2 à usage unique)



## FLEXIBLE

Cette brosse est conçue pour les instruments de grande taille qui nécessitent un nettoyage plus délicat, comme les optiques, les plastiques ou les endroits difficiles d'accès.



## EXTRA-FLEXIBLE

Les poils très longs et flexibles éliminent tout stress lors de l'assainissement, et en font la brosse idéale pour les instruments fragiles ainsi que pour les endoscopes souples et rigides. La longueur des poils permet de nettoyer des zones qui seraient autrement difficiles à atteindre, comme le canal des accessoires ou la déviation de l'extrémité des endoscopes souples.



## RIGIDE

La rigidité de cette brosse, ainsi que la longueur des poils et du manche, améliorent et simplifient le nettoyage des instruments.



## EXTRA-RIGIDE

Les fibres de polyamide sans danger pour les instruments offrent une rigidité semblable à celle de l'acier et permettent un nettoyage en profondeur des instruments souillés, en particulier sur les surfaces rainurées ou inégales.



## SÉLECTION DE PRODUITS

| N°D'ARTICLE     | TYPE DE BROSSE | DESCRIPTION                               | COULEUR   | LONGUEUR DE LA BROSSE | TAILLE DE LA BROSSE   | EMBALLAGE |
|-----------------|----------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| <b>50-40917</b> | Extra rigide   | Brosse plate réutilisable et autoclavable | Bleu      | 220 mm                | 75 mm x 20 mm x 10 mm | Sac de 3  |
| <b>50-40918</b> | Rigide         | Brosse plate réutilisable et autoclavable | Vert      | 220 mm                | 75 mm x 20 mm x 15 mm | Sac de 3  |
| <b>50-40919</b> | Flexible       | Brosse plate réutilisable et autoclavable | Jaune     | 220 mm                | 75 mm x 20 mm x 15 mm | Sac de 3  |
| <b>50-40920</b> | Extra flexible | Brosse plate réutilisable et autoclavable | Rouge     | 220 mm                | 75 mm x 20 mm x 25 mm | Sac de 3  |
| <b>50-40921</b> | Flexible       | Brosse plate à usage unique               | Orange    | 220 mm                | 60 mm x 20 mm x 15 mm | Sac de 20 |
| <b>50-40922</b> | Rigide         | Brosse plate à usage unique               | Bleu ciel | 220 mm                | 60 mm x 20 mm x 15 mm | Sac de 20 |


Les modèles réutilisables sont également disponibles en sacs de 50. Ajouter le suffixe "- 50"

BATRIK

# BROSSE DE NETTOYAGE RÉUTILISABLE POUR RÂPES ORTHOPÉDIQUES

Notre brosse de nettoyage réutilisable pour râpes orthopédiques est utilisée pour nettoyer les râpes orthopédiques et autres instruments similaires utilisés en chirurgie orthopédique.

- Elle est durable et peut supporter de nombreux cycles de stérilisation
- Poignée ergonomique en thermoplastique vaporisable
- Soies antibactériennes en polyamide
- Réutilisable
- Sans latex

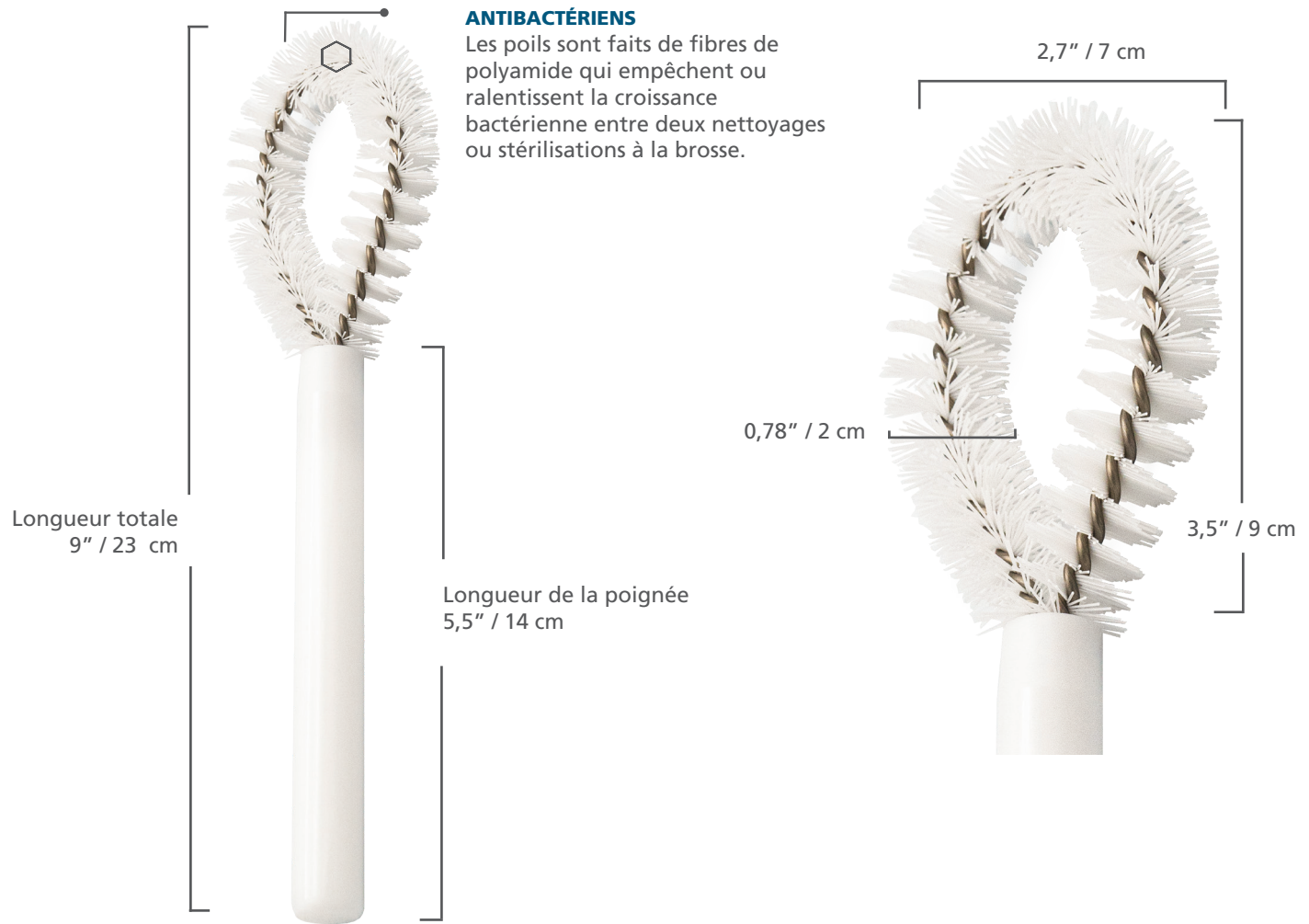

## SÉLECTION DE PRODUITS

| N° D'ARTICLE | LONGUEUR TOTALE | LONGUEUR DU MANCHE | TAILLE DE LA BROSSE                       | EMBALLAGE |
|--------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 50-RASP      | 9" / 23 cm      | 5,5" / 14 cm       | 0,78" x 2,7" x 3,5"<br>2 cm x 7 cm x 9 cm | 3 / sac   |


**BATRIK**

# BROSSE DE PRÉCISION RÉUTILISABLE

## NETTOYAGE DES INSTRUMENTS

Notre brosse de précision réutilisable pour le nettoyage des instruments est la brosse idéale pour l'élimination rapide des débris difficiles. Elle nettoie aussi bien en externe qu'en profondeur dans les mâchoires des instruments. Bien que les poils fermes et durables donnent l'impression d'être en acier inoxydable, il n'y a absolument aucun risque de dommages aux instruments ou de blessures corporelles.

- Les poils ont une densité extra-ferme et une durabilité supérieure
- Poils en polyamide (TYNEX<sup>MD</sup>)
- Poignée ergonomique en thermoplastique étuvable
- Stérilisable à la vapeur/chimique
- Sans latex

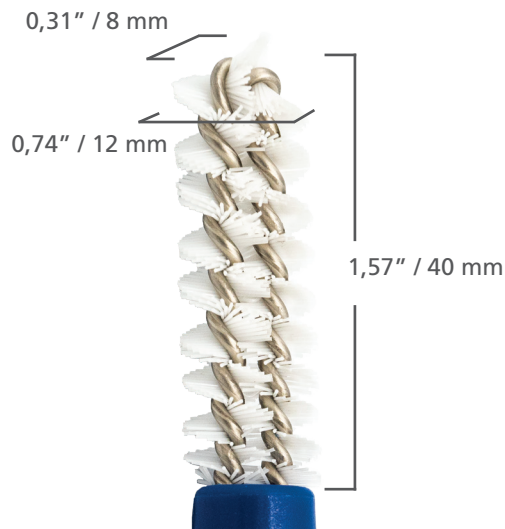

BON À SAVOIR : ÉLIMINE LE  
BESOIN DE LA BROSSSE À DENTS  
EN ACIER INOXYDABLE, QUI PEUT  
ENDOMMAGER LES  
INSTRUMENTS DE VALEUR !

### SÉLECTION DE PRODUITS

| N° D'ARTICLE | DESCRIPTION                                             | LONGUEUR TOTALE |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 50-40800     | Brosse de précision réutilisable pour nettoyage externe | 6,29" / 160 mm  |

EMBALLAGE : sac de 3

NOUVEAU!

# BROSSE TRIFECTA<sup>MC</sup>

## NETTOYAGE DES INSTRUMENTS

Voici la brosse Trifecta<sup>TM</sup>, un outil polyvalent **3 en 1** conçu pour répondre à tous vos besoins de nettoyage d'instruments. Elle est disponible en deux styles : l'un entièrement en **nylon** pour un nettoyage en douceur et l'autre avec des poils en nylon sur deux côtés et des poils en **acier inoxydable** sur le troisième, idéal pour s'attaquer aux accumulations les plus dures et aux tâches de nettoyage les plus tenaces.

### BROSSE TRIFECTA<sup>MC</sup> - NYLON

#### 1 BRISTES EN NYLON

Les poils en nylon doux et transparents offrent une solution de nettoyage efficace et sûre. efficace mais sûre. Ce côté permet de vérifier facilement la propreté, sans risquer d'endommager les surfaces délicates. Idéal pour un nettoyage léger et non invasif.


#### 2 BROSSE À EMBOUTS DE PRÉCISION

Atteignez les endroits difficiles à nettoyer grâce à l'embout de précision. Ce petit embout à poils fermes est conçu pour les endroits étroits et difficiles à atteindre, tels que les mâchoires d'instruments et les joints de boîtes.

#### 3 POILS DE NYLON FERMES.

Pour les résidus plus tenaces, la face en nylon ferme offre la puissance de nettoyage dont vous avez besoin. Avec des poils semblables à ceux de l'acier inoxydable, mais sans danger pour vos instruments, cette face traite facilement les saletés et les accumulations tenaces.

### BROSSE TRIFECTA<sup>MC</sup> - NYLON ET ACIER INOXYDABLE

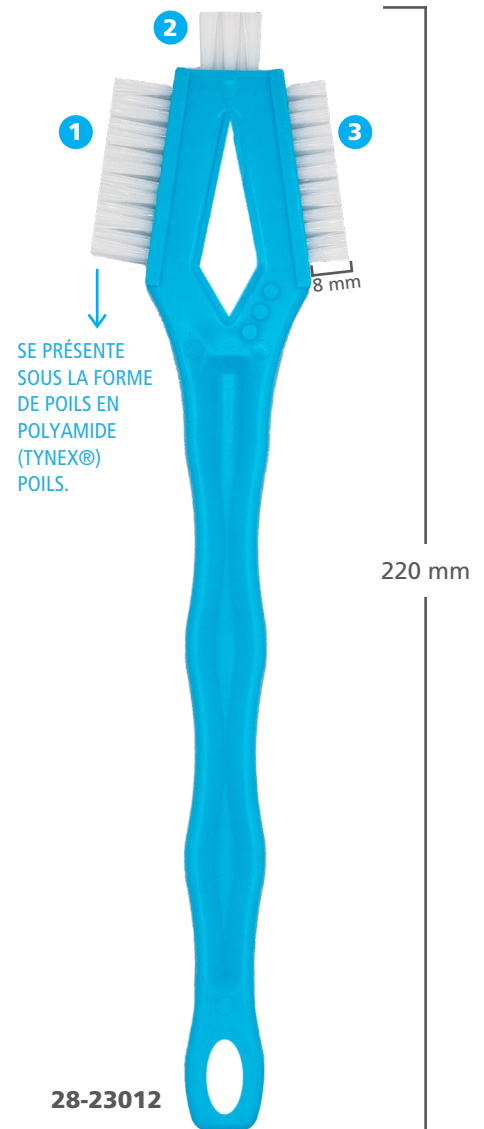

## SÉLECTION DES PRODUITS

| N° D'ARTICLE | COULEUR | DESCRIPTION                                  | LONGUEUR TOTAL | LONGUEUR DE LA BROSSE                         | POILS 1 Ø       | BPOILS 2 Ø      | POILS 3 Ø       |
|--------------|---------|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28-23012     | Bleu    | Brosse triple en nylon                       | 8.66" / 220 mm | 1.20" x 1.20" x 0.47" / 30.5 x 30.5 x 12.0 mm | 0.47" / 12.0 mm | 0.47" / 12.0 mm | 0.315" / 8.0 mm |
| 29-23012     | Bleu    | Brosse triple en nylon avec acier inoxydable | 8.66" / 220 mm | 1.20" x 1.20" x 0.47" / 30.5 x 30.5 x 12.0 mm | 0.47" / 12.0 mm | 0.47" / 12.0 mm | 0.47" / 12.0 mm |

EMBALLAGE : Sac de 3 - Pour un sac de 50, ajouter « -50 » à la suite du code de l'article.

BATRIK

# BROSSES DE NETTOYAGE POUR BOUTEILLES ET DRAINS

Conçues spécifiquement pour les applications hospitalières, nos brosses réutilisables pour le nettoyage des instruments sont dotées de poils longs et flexibles pour maximiser l'efficacité du nettoyage des grandes surfaces.


- Poils transparents en polyamide de haute qualité
- Débris faciles à identifier
- Autoclavable
- Sans latex

## BROSSE RÉUTILISABLE À BOCAL / BOUTEILLE



Poignée ergonomique

## BROSSE POUR DRAIN DE STÉRILISATEUR

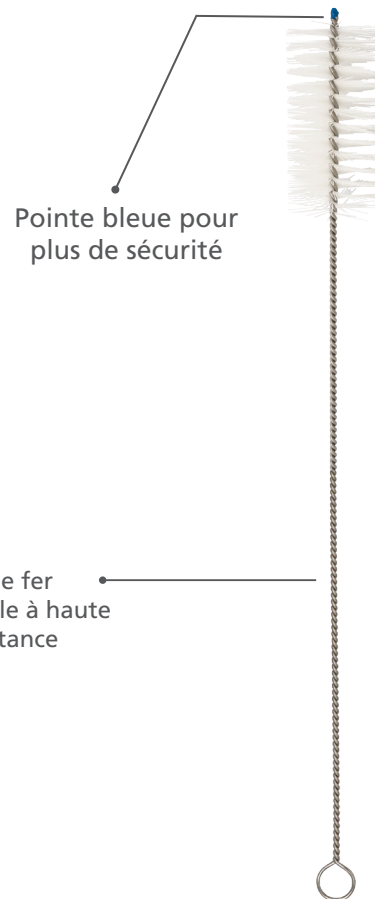

Pointe bleue pour plus de sécurité

Fil de fer inoxydable à haute résistance

## SÉLECTION DE PRODUITS

| N° D'ARTICLE    | DESCRIPTION                                     | LONGUEUR DE LA POIGNÉE | LONGUEUR DE LA BROSSE | BROSSE (Ø)   | LONGUEUR TOTALE |
|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| <b>50-10295</b> | Brosse réutilisable à bocal / bouteille         | 120 mm ± 2 mm          | 120 mm ± 5 mm         | 7 mm ± 2 mm  | 13,19" / 355 mm |
| <b>50-10224</b> | Brosse de nettoyage pour drain du stérilisateur | S. o.                  | 4" / 10,1 cm          | 2" / 5,08 cm | 24" / 609 mm    |

EMBALLAGE : sac de 3



BATRIK

# BROSSE D'ALÉSOIR ACÉTABULAIRE

Notre brosse de nettoyage à double extrémité est fabriquée exclusivement pour le nettoyage des alésours d'os acétabulaire. La brosse à tête circulaire de style « queue de cochon » est conçue pour nettoyer efficacement l'intérieur de l'alésoir, tandis que la brosse droite rigide à l'autre extrémité sert à nettoyer les trous de coupe individuels. La fusion spéciale des têtes de la brosse avec la poignée, ainsi que ses poils de qualité médicale antimicrobiens, assurent un outil de nettoyage durable, réutilisable et très efficace.



BROSSE DROITE



BROSSE RONDE



## SÉLECTION DE PRODUITS

| N° D'ARTICLE     | DESCRIPTION                                | LONGUEUR DU POIGNÉ                | BROSSE DROITE                     | BROSSE RONDE                  |
|------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>50-ACETAB</b> | Brosse de nettoyage d'alésoir acétabulaire | 4,72" / 120 mm<br>Ø 0,47" / 12 mm | 1,18" / 30 mm<br>Ø 0,3125" / 8 mm | 2" / 50 mm<br>Ø 1,75" / 45 mm |

EMBALLAGE : sac de 3

REMARQUE : Spécifications sujettes à de petites variations

# BROSSES RÉUTILISABLES TOUT USAGE

## Brosses à poignée en plastique

Nous proposons un large choix de brosses pour le nettoyage des instruments. Ces brosses sont idéales pour les instruments de grand diamètre, de forme unique et endoscopiques.

### Poignée en plastique In-Brush<sup>MC</sup>

Disponible en brosse à dents ordinaire (poils en nylon ou en acier inoxydable) et en brosse à double extrémité.


**28-72550**

**28-69394**

**29-72550**

**29-69394**

**29-70050**

**50-40911**

## SÉLECTION DE PRODUITS

| N° D'ARTICLE    | DESCRIPTION                                                                                     | LONGUEUR TOTALE | LONGUEUR DE LA BROSSSE      | HAUTEUR DE LA BROSSSE        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>28-72550</b> | Brosse réutilisable à poignée en plastique avec poils en nylon à une seule extrémité            | 7,25" / 184 mm  | 1,5" / 38 mm                | 0,5" / 12,7 mm               |
| <b>29-72550</b> | Brosse réutilisable à poignée en plastique avec poils en acier inoxydable à une seule extrémité | 7,25" / 184 mm  | 1,5" / 38 mm                | 0,5" / 12,7 mm               |
| <b>29-70050</b> | Brosse réutilisable à poignée en plastique avec poils en laiton à une seule extrémité           | 7,25" / 184 mm  | 1,5" / 38 mm                | 0,5" / 12,7 mm               |
| <b>28-69394</b> | Brosse réutilisable à poignée en plastique avec poils en nylon à double extrémité               | 6,9" / 175 mm   | 1,38" / 35 mm<br>1" / 25 mm | 0,39" / 10 mm<br>0,2" / 5 mm |
| <b>29-69394</b> | Brosse réutilisable à poignée en plastique avec poils en acier inoxydable à double extrémité    | 6,9" / 175 mm   | 1,38" / 35 mm<br>1" / 25 mm | 0,39" / 10 mm<br>0,2" / 5 mm |
| <b>50-40911</b> | Brosse en nylon pour le lavage des mains Réutilisable et autoclavable                           | 4,9" / 104 mm   | 3,74" / 95 mm               | 1,1" / 28 mm                 |

EMBALLAGE : sac de 3 - Pour un sac de 50, ajoutez « -50 » après le code de l'article.

**BATRIK**

# ENSEMBLES DE BROSSES DE NETTOYAGE POUR AUTOCLAVE


**BROSSE RONDE**

- Comprend 3 trous pour le placement réglable des pôles.
- Le placement réglable de la brosse (parallèle ou perpendiculaire) et la longueur plus importante de la brosse permettent d'accéder facilement aux coins difficiles à atteindre
- Fabriquée avec des poils de polyester approuvés par la FDA

**BROSSE À MAIN**

- Poignée ergonomique pour un meilleur confort de la main
- Des poils de polyester plus longs, approuvés par la FDA
- Facile à nettoyer (pas de cavité)

## SÉLECTION DE PRODUITS

### ENSEMBLE RÉGULIER DE BROSSES DE NETTOYAGE POUR AUTOCLAVE

| N° D'ARTICLE (ENSEMBLE) | DESCRIPTION                                             | N° D'ARTICLE (UNITÉ) | DESCRIPTION                             | DIMENSIONS                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>50-CLAVEREG</b>      | Ensemble RÉGULIER de brosse de nettoyage pour autoclave | <b>50-35900</b>      | 1 brosse à main                         | Longueur : 3,5" x 8" / 8,89 cm x 20,32 cm              |
|                         |                                                         | <b>50-55800</b>      | 1 brosse ronde (tête de brosse)         | Taille de la tête de brosse : 5,5 x 10" / 14 x 25,4 cm |
|                         |                                                         | <b>50-EXTPOLE</b>    | 1 pôle d'extension en aluminium anodisé | 2 - 4 pi / 60 - 122 cm                                 |

### ENSEMBLE SUPÉRIEUR DE BROSSES DE NETTOYAGE POUR AUTOCLAVE

| N° D'ARTICLE (ENSEMBLE) | DESCRIPTION                                              | N° D'ARTICLE (UNITÉ) | DESCRIPTION                             | DIMENSIONS                                             |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>50-CLAVESUP</b>      | Ensemble SUPÉRIEUR de brosse de nettoyage pour autoclave | <b>50-35900</b>      | 1 brosse à main                         | Longueur : 3,5" x 8" / 11,5 cm x 20,32cm               |
|                         |                                                          | <b>50-55800</b>      | 1 brosse ronde (tête de brosse)         | Taille de la tête de brosse : 5,5 x 10" / 14 x 25,4 cm |
|                         |                                                          | <b>50-EXTPOLE</b>    | 1 pôle d'extension en aluminium anodisé | 2 - 4 pi / 60 - 122 cm                                 |
|                         |                                                          | <b>SF-240</b>        | 2 écrans faciaux SAVEFACE <sup>MC</sup> | 9" / 23 cm                                             |

### COMPOSANTS DE REMPLACEMENT



**BROSSE À MAIN**  
**50-35900**  
Emballage : 1




**TÊTE DE BROSS**  
**50-55800**  
Emballage : 1



**PÔLE D'EXTENSION**  
**50-EXTPOLE**  
Emballage : 1



**ÉCRAN FACIAL**  
**SAVEFACE<sup>MC</sup> SF-240**  
Emballage : 100 / boîte

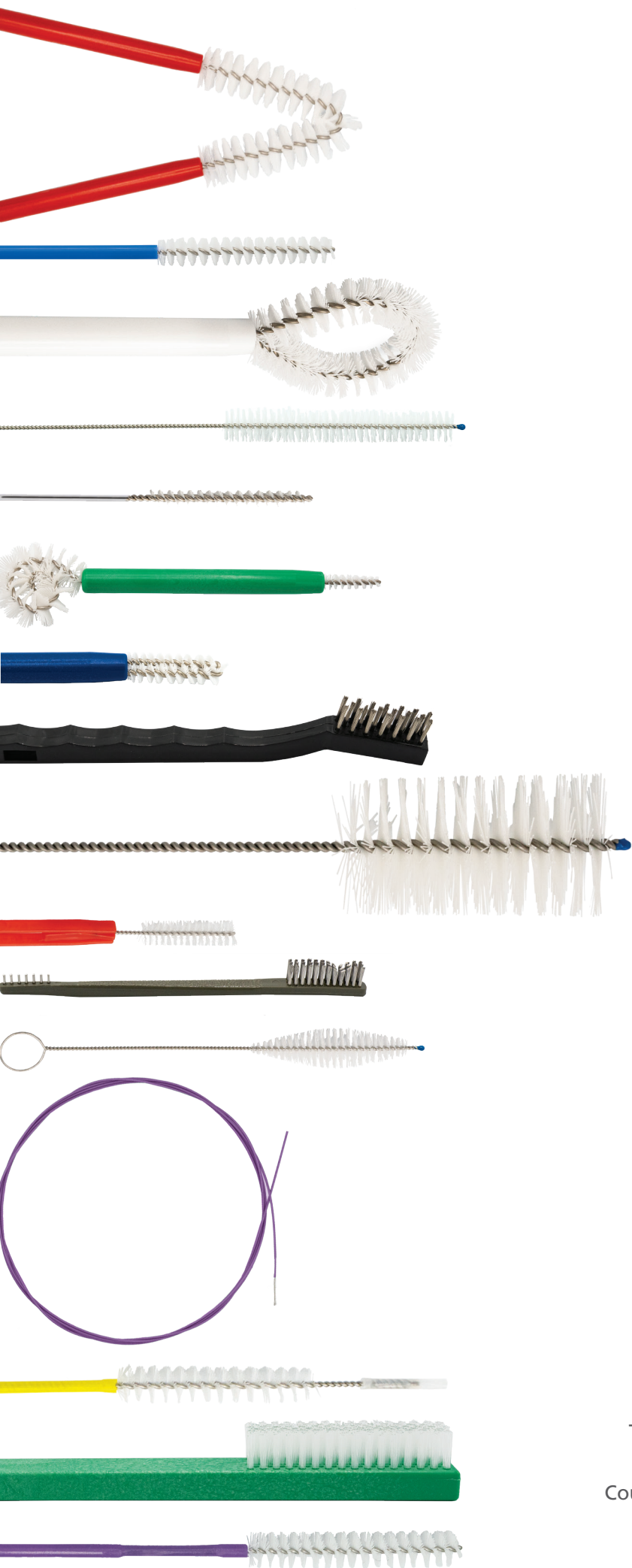

SURGMED GROUP

2165 46th Ave., Lachine, Québec H8T 2P1  
Téléphone : +1 514-631-7988 | Sans frais : 800-661-5432  
Télec. : +1 514-631-9083  
Courriel : [info@surgmed.com](mailto:info@surgmed.com) | Site Web : [www.batrik.com](http://www.batrik.com)